


English	INSTRUCTIONS FOR USE: Southern Implants® External Hex Implants
Español	INSTRUCCIONES DE USO: Implantes hexagonales externos Southern Implants®
Italiano	ISTRUZIONI PER L'USO: Southern Implants® Impianti Hex Esterni
Français	MODE D'EMPLOI : Implants Hexagonaux Externes de Southern Implants®
Deutsch	GEBRAUCHSANWEISUNGEN: Southern Implants® Außensechskant Implantate
Português	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Southern Implants® Implantes hex externo
Ελληνικά	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Southern Implants® Εξωτερικά εξαγωνικά εμφυτεύματα
Svenska	ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING: Southern Implants® Externa Sexkant Implantat



South Africa - Headquarters: 1 Albert Road, Irene, 0062, RSA
T: +27-12-667-1046 | E: info@southernimplants.com

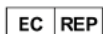

Southern Implants Europe AB: Holmgatan 30, S-791 71 Falun, Sweden
T: +46 23 13300 | E: ecrep@southernimplants.com

Subsidiaries

Australia

Southern Implants Australia
T: +61-(0)-8-9466-2627
E: info@southernimplants.com.au

Spain and Portugal

Southern Implants Iberica
T: +34 935 053 507
E: info@southernimplants.es

United Kingdom and Ireland

Southern Implants UK
T: +44-20-8899-6845 / 6 / 7
E: info@southernimplants.co.uk

USA and Canada

Southern Implants North America Inc.
T: +1-561-472-0990
E: customercare@southernimplants.com

Description

The External Hex implant is a self-tapping implant made of commercially pure Grade 4 Titanium (UTS $\geq$ 900 MPa). Implants are available with either a tapered or parallel walled body shape. All implants are surface-roughened up to the collar with the exception of the MSc version implants which have a 3 mm MSc surface coronally. The roughened surface has a Sa value of 1.4 microns. The External Hex implant is also available in the angulated platform Co-Axis® design. With a built-in platform angulation of 12°, 24° and 36°, this design enables tilting of the implant without compromising the restorative emergence angle.

Intended use

This system is intended to aid in the treatment of partially or fully edentulous patients eligible for placement of one or more dental implants as a means of fixing a permanent or removable single crown, partial or full-arch dental prosthesis in the upper or lower jaw.

These devices are intended to be placed into a pre-drilled site in the alveolar bone where they osseointegrate (form a rigid connection with bone), and an abutment is attached for retention of a prosthesis.

The devices allow for immediate or delayed prosthetic restoration based on the user's evaluation of the patient's eligibility.

The system constituents are classified as medical devices and are intended for single use on a single patient.

Indications for use

Southern Implants' External Hex implants are intended for surgical placement in the upper or lower jaw to provide a means for prosthetic attachment of crowns, bridges or overdentures utilizing delayed or immediate loading. Southern Implants' External Hex implants are intended for immediate function when good primary stability with appropriate occlusal loading is achieved.

Intended user

Maxillo-facial Surgeons, General Dentists, Orthodontists, Periodontists, Prosthodontists, and other appropriately trained and experienced implant users.

Intended environment

The devices are intended to be used in a clinical environment such as an operating theatre or a dentist consultation room.

Intended patient population

This device is used in the dental restoration of partially or fully edentulous patients in the upper or lower jaw. Restorations may comprise of single teeth, partial or full bridges, and may be fixed or removable.

Compatibility information

Southern Implants' implants should be restored with Southern Implants' components. Use components that correspond to the connection type and prosthetic platform when restoring the External Hex implants. For further information see the product catalogues (CAT-2020 & CAT-2095).

Table A – External Hex implant range

Item Code	MSc	Tapered/Cylindrical	Implant Diameter (mm)	Implant Lengths (mm)
Regular Implants				
Straight				
IP	✓	Tapered	Ø3.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
IBN		Cylindrical	Ø3.25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Tapered	Ø3.25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBS	✓	Cylindrical	Ø3.75	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cylindrical	Ø4.0	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15

IBT	✓	Tapered	Ø4.0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
BA	✓	Cylindrical	Ø5.0	6/ 7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Tapered	Ø5.0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Tapered	Ø6.0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Tapered	Ø3.25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Tapered	Ø5.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Tapered	Ø5.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Tapered	Ø5.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Tapered	Ø5.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Tapered	Ø6.0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Tapered	Ø6.0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Implants				
Straight				
IV-EX30-37		Tapered	Ø3.0 – Ø3.7	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Tapered	Ø3.5 – Ø4.5	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Tapered	Ø4.0 – Ø5.0	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Tapered	Ø5.2– Ø6.0	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Tapered	Ø3.0 – Ø3.7	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Tapered	Ø3.5 – Ø4.5	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Tapered	Ø4.0 – Ø5.0	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Tapered	Ø5.2– Ø6.0	10/ 11.5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Tapered	Ø3.0 – Ø3.7	11.5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Tapered	Ø3.5 – Ø4.5	11.5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Tapered	Ø4.0 – Ø5.0	11.5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Tapered	Ø5.2– Ø6.0	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Tapered	Ø3.0 – Ø3.7	11.5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Tapered	Ø3.5 – Ø4.5	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Tapered	Ø4.0 – Ø5.0	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Tapered	Ø5.2– Ø6.0	11.5/ 13/ 15/ 18
Internal Drive External Hex Implants				
INPI		Cylindrical	Ø3.3	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
IBI		Cylindrical	Ø3.75	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Tapered	Ø4.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cylindrical	Ø5.0	6/ 7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BATI		Tapered	Ø5.0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cylindrical	Ø6.0	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
BBBTI		Tapered	Ø6.0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18

NOTE: Not all products cleared for sale in all countries.

Clinical benefits

The clinical benefits of dental implant therapy include improved chewing function, speech, aesthetics and patient psychological wellbeing. Through this procedure patients can expect to have their missing teeth replaced and/or crowns restored.

Storage, cleaning and sterilisation

The component is supplied sterile (sterilised by gamma irradiation) and intended for single-use prior to the expiration date (see packaging label). Sterility is assured unless the container or seal is damaged or opened. If packaging is damaged do not use the product and contact your Southern representative or return to Southern Implants®. The devices must be stored in a dry place at room temperature and not exposed to direct sunlight. Incorrect storage may influence device characteristics. Do not reuse components indicated for single-use only. Reusing these components may result in:

- damage to the surface or critical dimensions, which may result in performance and compatibility degradation.
- adds the risk of cross-patient infection and contamination if single-use items are reused.

Southern Implants® does not accept any responsibility for complications associated with reused single-use components.

Contraindications

Contra-indications to implant therapy include:

- patients medically unfit for oral surgical procedures.
- where an inadequate number of implants can be placed limiting the functional support of the prosthesis.
- patients under the age of 18 years.
- patients with poor bone quality.
- patients with blood disorders.
- presence of infection at the implant site.
- patients with vascular impairment.
- patients with uncontrolled diabetes.
- patients with drug or alcohol abuse dependencies.
- patients undergoing chronic high dose steroid therapy.
- patients undergoing anti-coagulant therapy.
- patients with metabolic bone disease.
- patients undergoing radiotherapy treatment.
- patients with pure titanium, titanium alloy (Ti6Al4V), gold, palladium, polyether ether ketone (PEEK), or iridium allergies or hypersensitivities.

Warnings and precautions

THESE INSTRUCTIONS ARE NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR ADEQUATE TRAINING.

- For the safe and effective use of dental implants it is strongly suggested that specialised training be undertaken, including hands-on training to learn proper technique, biomechanical requirements and radiographic evaluations.
- Products must be secured against aspiration when handled intraorally. Aspiration of products may lead to infection or unplanned physical injury.

Responsibility for proper patient selection, adequate training, experience in the placement of implants and providing appropriate information for informed consent rests with the practitioner. Improper technique can result in implant failure, damage to nerves/vessels and/or loss of supporting bone. Implant failure increases when implants are placed in irradiated bone as radiotherapy can result in progressive fibrosis of vessels and soft tissue, leading to diminished healing capacity.

It is important to be aware and avoid damage to vital structures such as nerves, veins and arteries. Injuries to vital anatomical structures may cause serious complications such as injury to the eye, nerve damage and excessive bleeding. It is essential to protect the infraorbital nerve. Failing to identify actual measurements relative to the radiographic data could lead to complications.

New and experienced implant users should do training before using a new system or attempting to do a new treatment method. Take special care when treating patients who have local or systemic factors that could affect the healing of

the bone and soft tissue (i.e., poor oral hygiene, uncontrolled diabetes, are on steroid therapy, smokers, infection in the nearby bone and patients who had orofacial radiotherapy).

Thorough screening of prospective implant candidates must be performed including:

- a comprehensive medical and dental history.
- visual and radiological inspection to determine adequate bone dimensions, anatomical landmarks, occlusal conditions and periodontal health.
- bruxism and unfavourable jaw relations must be taken into account.
- proper preoperative planning with a good team approach between well trained surgeons, restorative dentists and lab technicians is essential for successful implant treatment.
- minimising the trauma to the host tissue increases the potential for successful osseointegration.
- electrosurgery should not be attempted around metal implants as they are conductive.

Should the device not operate as intended, it must be reported to the manufacturer of the device. The contact information for the manufacturer of this device to report a change in performance is: sicomplaints@southernimplants.com.

Side effects

The side effects of the use of the system are not dissimilar to those of dental implant therapy. Possible side effects to implant therapy include:

- pain
- swelling
- phonetic difficulties
- gingival inflammation

Less common but more persistent symptoms include, but are not limited to:

- allergic reaction(s) to implant and/or abutment material
- breakage of the implant and/or abutment
- loosening of the abutment screw and/or retaining screw
- infection requiring revision of the dental implant
- nerve damage resulting in permanent weakness, numbness, or pain
- histologic responses with possible macrophage and/or fibroblast involvement
- fat emboli formation
- loosening of the implant requiring revision surgery
- perforation of the maxillary sinus
- perforation of the labial and lingual plates
- bone loss possibly resulting in revision or removal of the implant.

Precaution: maintaining sterility protocol

Implants are packaged as follows:

1. An outer package consisting of a rigid, clear box which acts as protection for the inner package.
2. The inner package consisting of a blister pack (clear plastic-formed blister base with a TYVEK “peel-back” lid).
3. Within the inner package, there is a hollow tube which contains one implant suspended from a titanium ring, this ensures the implant never touches the inside of the plastic tube.
4. Labelling information is located on the surface of the peel-back lid and on the outside of the rigid box.

Care must be taken to maintain the sterility of the implant by proper opening of the packaging and handling of the implant.

1. Open the implant package in the non-sterile field, with non-sterile gloves, tear the address label to open the box.
2. With non-sterile gloves, remove the inner blister pack. Do not place the plastic box or blister pack-lid onto the sterile field. The contents of this inner package are sterile.

3. The sealed blister is to be opened by an assistant (with nonsterile gloves): remove the TYVEK lid and drop or place the sterile tube onto the sterile field, open the tube cap and attach the implant placement tool onto the implant and carefully remove from the sterile tube. Do not touch the sterile implant.

Other sterile components are packed in a peel pouch or blister base with a “peel-back” lid. Labelling information is located on the bottom half of the pouch, inside the packet or on the surface of the peel-back lid. Sterility is assured unless the pouch is damaged or opened. Non-sterile components are supplied clean but not sterile in a peel pouch or blister base with peel-back lid. Labelling information is located on the bottom half of the pouch or on the surface of the peel-back lid.

Notice regarding serious incidents

Any serious incident that has occurred in relation with the device must be reported to the manufacturer of the device and the competent authority in the member state in which the user and/or patient is established.

The contact information for the manufacturer of this device to report a serious incident is as follows: sicomplaints@southernimplants.com.

Materials

Material type Commercially pure titanium (grade 4, ASTM F67 and ISO5832-2, UTS ≥ 900 MPa)

Disposal

Disposal of the device and its packaging: follow local regulations and environmental requirements, taking different contamination levels into account. When disposing of spent items, take care of sharp drills and instruments. Sufficient PPE must be used at all times.

MR safety

Nonclinical testing has demonstrated that the Southern Implants® dental implants, metallic abutments and prosthetic screws are MR conditional.

A patient with these devices can be safely scanned in a MR system meeting the following conditions:

- static magnetic field of 1.5 Tesla and 3.0 Tesla only.
- maximum spatial gradient magnetic field of 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- maximum MR system reported SAR corresponding to Normal Operating mode for all landmarks (Head SAR of 3.2 W/kg for head landmark, 2 W/kg whole body, and appropriate partial body SAR for other landmarks). For imaging landmarks above the thorax, a continuous scan time of 15 minutes will require a cooling delay of at least 5 minutes.
- in the non-clinical testing, the image artifact caused by the device extends approximately 20 mm from the Southern Implants' dental implants, abutments and prosthetic screws, when imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0 Tesla MRI system.

Removable restorations should be taken out prior to scanning, as is done for watches, jewellery etc.

Should there be no MR symbol on the product label, please note that this device has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment.

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

As required by the European Medical Device Regulation (MDR; EU2017/745), a Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) is available for perusal with regard to Southern Implants® product ranges.

The relevant SSCP can be accessed at <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

NOTE: the above website will be available upon the launch of the European Database on Medical Devices (EUDAMED).

Disclaimer of liability

This product is part of the Southern Implants® product range and should only be used with the associated original products and according to the recommendations as in the individual product catalogues. The user of this product has to study the development of the Southern Implants® product range and take full responsibility for the correct indications and use of this product. Southern Implants® does not assume liability for damage due to incorrect use. Please note that some Southern Implants® products may not be cleared or released for sale in all markets.

Basic UDI

Product	Basic-UDI Number
Basic-UDI for General Dental Implants	6009544038699H

Related literature and catalogues

CAT-2020 - External Hex Implants Product Catalogue

CAT-2095 - External Hex INVERTA® Implants Product Catalogue

Symbols and warnings

											
Manufacturer: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, South Africa. Tel: +27 12 667 1046	CE mark 2797	Prescription device*	Sterilised using irradiation	Non-sterile	Use by date (mm-yy)	Do not reuse	Do not resterilise	Catalogue number	Batch code	Medical device	Authorised representative in the European Community
											
Authorised representative for Switzerland	Date of manufacture	Magnetic Resonance conditional	Magnetic Resonance safe	Single sterile barrier system with protective packaging inside	Single sterile barrier system	Consult instruction for use	Caution	Keep away from sunlight	Do not use if package is damaged		

* Prescription device: Rx only. Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a licenced physician or dentist.

Canada licence exemption: Please note that not all products may have been licensed in accordance with Canadian law.

All rights reserved. Southern Implants®, the Southern Implants® logotype and all other trademarks used in this document are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Southern Implants®. Product images in this document are for illustration purposes only and do not necessarily represent the product accurately to scale. It is the responsibility of the clinician to inspect the symbols that appear on the packaging of the product in use.

Descripción

El implante hexagonal externo es un implante autorroscante fabricado con Titanio especial de Grado 4 comercialmente puro (UTS ≥ 900 Mpa). Los implantes están disponibles con forma de cuerpo cónico o de paredes paralelas. Todos los implantes tienen una superficie rugosa hasta el cuello, a excepción de los implantes de la versión MSc que tienen una superficie MSc de 3 mm coronalmente. La superficie rugosa tiene un valor Sa de 1,4 micrómetros. El implante hexagonal externo también está disponible de plataforma angulada Co-Axis®. Con una angulación de plataforma incorporada de 12°, 24° y 36°, este diseño permite la inclinación del implante sin comprometer el ángulo de emergencia de la restauración.

Uso previsto

Este sistema está destinado a ser utilizado como parte de procedimientos y protocolos quirúrgicos para ayudar en el tratamiento de pacientes parcial o totalmente desdentados que reúnan las condiciones para la colocación de uno o más implantes dentales como medio de fijación de una corona individual permanente o extraíble, una prótesis dental parcial o de arcada completa en el maxilar superior o inferior.

Estos dispositivos están destinados a colocarse en un sitio preperforado en el hueso alveolar donde se osteointegran (forman una conexión rígida con el hueso) y se coloca un pilar para la retención de una prótesis.

Los dispositivos permiten la restauración protésica inmediata o retardada en función de la evaluación del usuario sobre la elegibilidad del paciente.

Los componentes del sistema están clasificados como productos sanitarios y están destinados a un solo uso en un solo paciente.

Indicaciones de uso

Los implantes hexagonales externos de Southern Implants están pensados para su colocación quirúrgica en el maxilar superior o inferior con el fin de proporcionar un medio para la fijación protésica de coronas, puentes o sobredentaduras utilizando una carga retardada o inmediata. Los implantes hexagonales externos de Southern Implants están pensados para una función inmediata cuando se consigue una buena estabilidad primaria con una carga oclusal adecuada.

Usuario previsto

Cirujanos maxilofaciales, dentistas generales, ortodoncistas, periodoncistas, prostodoncistas y otros usuarios de implantes debidamente capacitados y con experiencia.

Entorno previsto

Los dispositivos están destinados a ser utilizados en un entorno clínico, como un quirófano o una consulta de dentista.

Población de pacientes prevista

Este dispositivo se utiliza en la restauración dental de pacientes con el maxilar superior o inferior parcialmente o totalmente edéntulo. Las restauraciones pueden consistir en dientes individuales, puentes parciales o completos, y pueden ser fijas o extraíbles.

Información sobre la compatibilidad

Los implantes de Southern Implants se deben restaurar con componentes de Southern Implants. Utilice componentes que se correspondan con el tipo de conexión, y la plataforma protésica al restaurar los implantes hexagonales. Para más información consulte los catálogos de productos (CAT-2020 y CAT-2095).

Tabla A – Gama de implantes hexagonales externos

Código de artículo	MSc	Cónico/cilíndrico	Diámetro del implante (mm)	Longitudes del implante (mm)
Implantes regulares				
Rectos				
IP	✓	Cónico	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Cilíndrico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Cónico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

IBS	✓	Cilíndrico	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cilíndrico	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBT	✓	Cónico	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Cilíndrico	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Cónico	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Cónico	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Cónico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Cónico	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Cónico	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Implantes INVERTA®				
Rectos				
IV-EX30-37		Cónico	Ø3.0 Ø3.7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Cónico	Ø3.5 – Ø4.5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Cónico	Ø4.0 – Ø5.0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Cónico	Ø5.2– Ø6.0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Cónico	Ø3.0 Ø3.7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Cónico	Ø3.5 – Ø4.5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Cónico	Ø4.0 – Ø5.0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Cónico	Ø5.2– Ø6.0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Cónico	Ø3.0 Ø3.7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Cónico	Ø3.5 – Ø4.5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Cónico	Ø4.0 – Ø5.0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Cónico	Ø5.2– Ø6.0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Cónico	Ø3.0 Ø3.7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Cónico	Ø3.5 – Ø4.5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Cónico	Ø4.0 – Ø5.0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Cónico	Ø5.2– Ø6.0	11,5/ 13/ 15/ 18
Implantes hexagonales externos de accionamiento interno				
INPI		Cilíndrico	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Cilíndrico	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cilíndrico	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Cónico	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cilíndrico	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Cónico	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

NOTA: No todos los productos están autorizados para su venta en todos los países.

Beneficios clínicos

Los beneficios clínicos del tratamiento con implantes dentales incluyen la mejora de la función masticatoria, el habla, la estética y el bienestar psicológico del paciente. Mediante este procedimiento se pueden reemplazar los dientes perdidos y/o se pueden restaurar las coronas de los pacientes.

Almacenamiento, limpieza y esterilización

El componente se suministra estéril (esterilizado por irradiación gamma) y destinado a un solo uso antes de la fecha de caducidad (véase la etiqueta del envase). La esterilidad está garantizada a menos que el envase o el sello estén dañados o abiertos. Si el envase está dañado, no utilice el producto y póngase en contacto con su representante o devuélvalo a Southern Implants®. Los dispositivos deben almacenarse en un lugar seco a temperatura ambiente y no deben ser expuestos a la luz solar directa. Un almacenamiento incorrecto puede influir en las características del dispositivo. No reutilice los dispositivos indicados para un solo uso. La reutilización de estos componentes puede provocar

- daños en la superficie o en las dimensiones críticas, lo que puede provocar una degradación del rendimiento y de la compatibilidad.
- aumenta el riesgo de infección y contaminación cruzada entre pacientes si se reutilizan los artículos de un solo uso.

Southern Implants® no acepta ninguna responsabilidad por las complicaciones asociadas con componentes de un solo uso reutilizados.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones de la terapia con implantes incluyen:

- pacientes que son médicamente inadecuados para procedimientos quirúrgicos orales.
- donde puede colocarse un número inadecuado de implantes, lo que limita el soporte funcional de la prótesis.
- menores (pacientes de menos de 18 años).
- pacientes con mala calidad ósea.
- pacientes con trastornos sanguíneos.
- presencia de infección en el lugar del implante.
- pacientes con alteraciones vasculares.
- pacientes con diabetes no controlada.
- pacientes con dependencia de drogas o alcohol.
- pacientes sometidos a terapia crónica con altas dosis de esteroides.
- pacientes sometidos a terapia anticoagulante.
- pacientes con enfermedad ósea metabólica.
- pacientes sometidos a tratamiento de radioterapia.
- pacientes con alergias o hipersensibilidad al titanio puro, aleación de titanio (Ti6Al4V), oro, paladio, poliéter éter cetona (PEEK) o iridio;

Advertencias y precauciones

ESTAS INSTRUCCIONES NO TIENEN LA INTENCIÓN DE SER UN SUSTITUTO DE UNA CAPACITACIÓN ADECUADA.

- Para el uso seguro y efectivo de los implantes dentales, se sugiere firmemente realizar una capacitación especializada, que incluya capacitación práctica para aprender la técnica apropiada, los requisitos biomecánicos y las evaluaciones radiográficas.
- Los productos deben asegurarse contra la aspiración cuando se manipulan por vía intrabucal. La aspiración de productos puede provocar una infección o una lesión física imprevista.

La responsabilidad de la selección apropiada del paciente, la capacitación adecuada, la experiencia en la colocación de implantes y el suministro de información adecuada para el consentimiento informado recaen en el profesional. Una técnica inapropiada puede provocar falla del implante, daño a los nervios/vasos y/o pérdida del hueso de soporte. El fracaso de los implantes aumenta cuando éstos se colocan en hueso irradiado, ya que la radioterapia puede provocar una fibrosis progresiva de los vasos y los tejidos blandos, lo que conduce a una disminución de la capacidad de cicatrización.

Es importante estar atento y evitar dañar estructuras vitales como nervios, venas y arterias. Las lesiones en estructuras anatómicas vitales pueden causar complicaciones graves, como lesiones en los ojos, daños en los

nervios y hemorragias excesivas. Es esencial proteger el nervio infraorbitario. No identificar las medidas reales en relación con los datos radiográficos podría dar lugar a complicaciones.

Los usuarios de implantes, tanto nuevos como experimentados, deben realizar una capacitación antes de utilizar un nuevo sistema o proceder a utilizar el sistema nuevo. Se deberá tener especial cuidado cuando se trate a pacientes que tengan factores locales o sistémicos que puedan afectar a la cicatrización del hueso y los tejidos blandos (es decir, mala higiene bucal, diabetes no controlada, en tratamiento con esteroides, fumadores, infección en el hueso cercano y pacientes que hayan recibido radioterapia oro-facial).

Se debe realizar una selección exhaustiva de los posibles candidatos a implantes, que incluya:

- un historial médico y dental completo;
- una inspección visual y radiológica para determinar dimensiones óseas adecuadas, puntos de referencia anatómicos, condiciones oclusales y salud periodontal;
- se debe tomar en cuenta el bruxismo y las relaciones desfavorables de la mandíbula;
- una planificación preoperatoria apropiada con un buen enfoque en equipo entre cirujanos, odontólogos restauradores y técnicos de laboratorio correctamente capacitados es esencial para el tratamiento de implantes exitoso;
- minimizar el traumatismo en el tejido receptor aumenta las posibilidades de éxito de la osteointegración;
- no debe intentarse la electrocirugía alrededor de los implantes metálicos ya que son conductores.

En caso de que el dispositivo no funcione según lo previsto, deberá informarse de ello al fabricante del mismo. La información de contacto del fabricante de este producto para notificar un cambio en el rendimiento es la siguiente: sicomplaints@southernimplants.com.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios del uso del sistema no son distintos de los del tratamiento con implantes dentales. Los posibles efectos secundarios del tratamiento con implantes son:

- Dolor
- Hinchazón
- Dificultades fonéticas
- Inflamación gingival

Los síntomas menos frecuentes pero más persistentes incluyen, entre otros:

- reacción(es) alérgica(s) al material del implante y/o pilar.
- rotura del implante y/o pilar.
- aflojamiento del tornillo del pilar y/o del tornillo de retención
- infección que requiera la revisión del implante dental.
- lesiones nerviosas que provoquen debilidad, entumecimiento o dolor permanentes.
- respuestas histológicas con posible implicación de macrófagos y/o fibroblastos.
- formación de émbolos de grasa.
- aflojamiento del implante que requiera cirugía de revisión.
- perforación del seno maxilar.
- perforación de las placas labial y lingual.
- Pérdida ósea que puede dar lugar a la revisión o retirada del implante.

Precaución: mantener el protocolo de esterilidad

Los implantes se embalan de la siguiente manera:

1. Un envase exterior consistente en una caja rígida y transparente que sirve de protección para el envase interior.
2. El envase interior, que consiste en un blíster (base de plástico transparente con una cubierta de TYVEK "despegable").

3. Dentro del envase interior hay un tubo hueco que contiene un implante suspendido de un anillo de titanio, lo que garantiza que el implante nunca toque el interior del tubo de plástico.
4. La información del etiquetado se encuentra en la superficie de la cubierta despegable y en el exterior de la caja rígida.

Se debe tener cuidado de mantener la esterilidad del implante mediante la apertura adecuada del embalaje y la manipulación del implante.

1. Para abrir el paquete del implante en el campo no estéril, con guantes no estériles, rompa la etiqueta de la dirección para abrir la caja.
2. Con guantes no estériles, retire el blíster interior. No coloque la caja de plástico o la cubierta del blíster sobre el campo estéril. El contenido de este envase interior es estéril.
3. El blíster sellado debe ser abierto por un asistente (con guantes no estériles), retirar la cubierta de TYVEK y dejar caer o colocar el tubo estéril en el campo estéril, abrir la cubierta del tubo y colocar la herramienta de colocación del implante en el mismo y retirarla cuidadosamente del tubo estéril. No toque el implante estéril.

Los demás componentes estériles se envasan en una bolsa despegable o en una base tipo blíster con una cubierta "despegable". La información de etiquetado se encuentra en la mitad inferior de la bolsa, en el interior del paquete o en la superficie de la cubierta despegable. La esterilidad está garantizada a menos que la bolsa esté dañada o abierta. Los componentes no estériles se suministran limpios pero no estériles en una bolsa despegable o en una base tipo blíster con cubierta despegable. La información de etiquetado se encuentra en la mitad inferior de la bolsa, o en la superficie de la cubierta despegable.

Aviso sobre incidentes graves

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante del producto y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

La información de contacto del fabricante de este producto para notificar un incidente grave es la siguiente: sicomplaints@southernimplants.com.

Materiales

Tipo de material Titanio comercialmente puro (grado 4, ASTM F67, ISO5832-2, UTS ≥ 900 MPa)

Eliminación

Eliminación del dispositivo y de su empaque: siga la normativa local y los requisitos medioambientales, teniendo en cuenta los diferentes niveles de contaminación. Al eliminar los artículos usados, tenga cuidado con las fresas e instrumentos afilados. Debe utilizarse siempre el EPP necesario.

Seguridad de la RMI

Pruebas no clínicas han demostrado que los implantes dentales, los pilares metálicos y los tornillos protésicos de Southern Implants® son condicionales en el caso de realizarse RMI.

Un paciente con estos dispositivos puede ser explorado con seguridad en un sistema de RMI que cumpla las siguientes condiciones

- Un campo magnético estático de 1,5 Tesla y 3,0 Tesla solamente.
- Un campo magnético con una gradiente espacial máximo de 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- El sistema de RM máximo notificó el SAR correspondiente al modo de funcionamiento normal para todos los puntos de referencia (SAR de la cabeza de 3,2 W/kg para el punto de referencia de la cabeza, 2 W/kg para todo el cuerpo y el SAR corporal parcial adecuado para otros puntos de referencia). Para obtener imágenes de puntos de referencia situados por encima del tórax, un tiempo de exploración continua de 15 minutos requerirá un retraso de enfriamiento de al menos 5 minutos.

- En las pruebas no clínicas, el artefacto de imagen causado por el dispositivo se extiende aproximadamente 20 mm desde los implantes dentales Southern Implants, los pilares y los tornillos protésicos, cuando se obtienen imágenes con una secuencia de pulsos de eco de gradiente y un sistema de RMI de 3,0 Tesla.

Las restauraciones extraíbles deben retirarse antes de la exploración, como se hace con los relojes, las joyas, etc.

Si en la etiqueta del producto no aparece el símbolo de RMI, tenga en cuenta que no se ha evaluado la seguridad y la compatibilidad de este dispositivo en el entorno de RMI.

Resumen de seguridad y rendimiento clínico (SSCP)

Tal y como exige el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR; EU 2017/745), se puede consultar un resumen de la Seguridad y el Rendimiento Clínico (SSCP) en relación con las gamas de productos de Southern Implants®.

Se puede acceder al resumen de Seguridad y el Rendimiento Clínico SSCP correspondiente en <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

NOTA: El sitio web anterior estará disponible cuando se ponga en marcha la Base de Datos Europea de Productos Sanitarios (EUDAMED).

Descarga de responsabilidad

Este producto forma parte de la gama de productos de Southern Implants® y solo debe utilizarse con los productos originales asociados y de acuerdo con las recomendaciones que figuran en los catálogos de productos individuales. El usuario de este producto tiene que estudiar el desarrollo de la gama de productos de Southern Implants® y asumir toda la responsabilidad por las indicaciones y el uso correctos de este producto. Southern Implants® no asume la responsabilidad por daños debido a un uso incorrecto. Tenga en cuenta que algunos productos de Southern Implants® pueden no estar autorizados o aprobados para su venta en todos los mercados.

Identificación básica

Producto	Número de Identificación Básico
Información básica para Implantes dentales generales	6009544038699H

Literatura y catálogos relacionados

CAT-2020 - Catálogo de productos de implantes Hexagonales externos

CAT-2095 - Catálogo de productos de implantes INVERTA® de hexágono externo

Símbolos y advertencias

Fabricante: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, Sudáfrica. Tel: +27 12 667 1046	Marcado CE 2797	Dispositivo de prescripción*	Esterilización por irradiación	No esterilizado	Usar antes de (mm-aa)	No reutilizar	No volver a esterilizar	Número de catálogo	Código de lote	Dispositivo médico	Representante autorizado en la Comunidad Europea
Representante autorizado para Suiza	Fecha de fabricación	Condicional de Resonancia Magnética	Seguro para Resonancia Magnética	Sistema de barrera estéril simple con embalaje protector en el interior	Sistema de barrera estéril único	Consultar las instrucciones de uso	Precaución	Mantener alejado de la luz del sol	No utilizar si el envase está dañado		

* Dispositivo de prescripción: Únicamente con receta médica. Precaución: La Ley federal restringe la venta de este dispositivo a un médico o dentista con licencia o por orden del mismo.

Exención de licencia en Canadá: Tenga en cuenta que es posible que no todos los productos hayan sido autorizados de acuerdo con la legislación canadiense.

Todos los derechos reservados. Southern Implants®, el logotipo de Southern Implants® y todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son, si no se indica otra cosa o es evidente por el contexto en un caso determinado, marcas comerciales de Southern Implants®. Las imágenes de los productos que aparecen en este documento son solo para fines ilustrativos y no representan necesariamente el producto con exactitud a escala. Es responsabilidad del clínico inspeccionar los símbolos que aparecen en el envase del producto en uso.

Descrizione

L'impianto Hex Esterno è un impianto autofilettante in titanio di grado 4 commercialmente puro (UTS $\geq$ 900 MPa). Gli impianti sono disponibili con una forma del corpo a parete rastremata o parallela. Tutti gli impianti sono irruviditi fino al colletto, ad eccezione degli impianti in versione MSc che hanno una superficie MSc di 3 mm coronalmente. La superficie irruvidita ha un valore Sa di 1,4 micron. L'impianto Hex Esterno è disponibile anche nella versione con piattaforma angolata Co-Axis®. Con un'angolazione della piattaforma integrata di 12°, 24° e 36°, questo design consente di inclinare l'impianto senza compromettere l'angolo di emergenza del restauro.

Uso previsto

Questo sistema è destinato a favorire il trattamento di pazienti parzialmente o totalmente edentuli idonei all'inserimento di uno o più impianti dentali come mezzo per fissare una protesi dentale permanente o rimovibile a corona singola, parziale o ad arco intero nella mascella superiore o inferiore.

Questi dispositivi sono destinati a essere inseriti in un sito preforato nell'osso alveolare, dove si osteointegrano (formano una connessione rigida con l'osso) e viene fissato un moncone per la ritenzione di una protesi.

I dispositivi consentono il restauro protesico immediato o ritardato sulla base della valutazione della loro idoneità da parte dell'utente.

I componenti del sistema sono classificati come dispositivi medici e sono destinati all'uso singolo su un singolo paziente.

Istruzioni per l'uso

Gli impianti Hex Esterni di Southern Implants sono destinati all'inserimento chirurgico nella mascella superiore o inferiore per fornire un mezzo per il fissaggio protesico di corone, ponti o overdenture utilizzando un carico ritardato o immediato. Gli impianti Hex Esterni di Southern Implants sono destinati alla funzione immediata quando si raggiunge una buona stabilità primaria con un carico occlusale appropriato.

Utilizzatore previsto

Chirurghi maxillo-facciali, dentisti generali, ortodontisti, parodontologi, protesisti e altri utilizzatori di impianti adeguatamente formati ed esperti.

Ambiente previsto

I dispositivi sono destinati ad essere utilizzati in un ambiente clinico come una sala operatoria o una sala di consultazione per dentisti.

Popolazione di pazienti prevista

Questo dispositivo viene utilizzato nella ricostruzione dentale di pazienti parzialmente o completamente edentuli nella mascella superiore o inferiore. I restauri possono comprendere denti singoli, ponti parziali o totali, e possono essere fissi o rimovibili.

Informazioni sulla compatibilità

È necessario ricostruire gli impianti Southern Implants mediante l'impiego di componenti Southern Implants. Per il ripristino degli impianti Hex Esterni, utilizzare componenti che corrispondono al tipo di connessione e alla piattaforma protesica. Per ulteriori informazioni, consultare i cataloghi dei prodotti (CAT-2020 e CAT-2095).

Tabella A - Gamma di impianti Hex Esterni

Codice prodotto	MSc	Conico/Cilindrico	Diametro dell'Impianto (mm)	Lunghezze dell'Impianto (mm)
Impianti Regolari				
Dritto				
IP	✓	Rastremati	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Cilindrici	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Rastremati	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

IBS	✓	Cilindrici	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cilindrici	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBT	✓	Rastremati	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Cilindrici	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Rastremati	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Rastremati	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Rastremati	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Rastremati	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Rastremati	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Rastremati	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Rastremati	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Rastremati	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Rastremati	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Impianti				
Dritto				
IV-EX30-37		Rastremati	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Rastremati	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Rastremati	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Rastremati	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Rastremati	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Rastremati	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Rastremati	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Rastremati	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Rastremati	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Rastremati	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Rastremati	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Rastremati	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Rastremati	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Rastremati	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Rastremati	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Rastremati	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
Impianti Hex Esterni ad Azionamento Interno				
INPI		Cilindrici	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Cilindrici	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Rastremati	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cilindrici	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Rastremati	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cilindrici	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Rastremati	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

NOTA: Non tutti i prodotti sono autorizzati alla vendita in tutti i Paesi.

Vantaggi clinici

I vantaggi clinici della terapia implantare comprendono il miglioramento della funzione masticatoria, del linguaggio, dell'estetica e del benessere psicologico del paziente. Mediante questa procedura i pazienti possono aspettarsi di ottenere la sostituzione dei denti mancanti e/o il ripristino delle corone.

Conservazione, pulizia e sterilizzazione

Il componente è fornito sterile (sterilizzato mediante irradiazione gamma) e destinato al monouso prima della data di scadenza (vedere l'etichetta della confezione). La sterilizzazione è garantita, a meno che il contenitore o il sigillo non siano rovinati o aperti. Se la confezione è danneggiata, non utilizzare il prodotto e contattare il rappresentante Southern o restituirlo a Southern Implants®. I dispositivi devono essere conservati in un luogo asciutto a temperatura ambiente e non esposti alla luce solare diretta. La conservazione errata può influire sulle caratteristiche del dispositivo. Non riutilizzare i componenti indicati come monouso. Il riutilizzo di questi componenti può comportare:

- danni alla superficie o dimensioni critiche, che possono provocare un degrado delle prestazioni e della compatibilità;
- aumento del rischio di infezione e contaminazione da pazienti incrociati, se gli articoli monouso vengono riutilizzati.

Southern Implants® non si assume alcuna responsabilità per le complicazioni associate ai componenti monouso riutilizzati.

Controindicazioni

Le controindicazioni alla terapia implantare includono:

- pazienti non idonei dal punto di vista medico alle procedure chirurgiche orali;
- in pazienti in cui un numero inadeguato di impianti può essere posizionato limitando il supporto funzionale della protesi;
- pazienti di età inferiore ai 18 anni;
- pazienti con scarsa qualità dell'osso;
- pazienti con disturbi del sangue;
- presenza di infezioni nel sito implantare;
- pazienti con compromissione vascolare;
- pazienti con diabete non controllato;
- pazienti con dipendenza da droghe o abuso di alcol;
- pazienti sottoposti a terapia cronica con steroidi ad alte dosi;
- pazienti sottoposti a terapia anti-coagulante;
- pazienti con malattie metaboliche dell'osso;
- pazienti sottoposti a trattamento radioterapico;
- pazienti con allergie o ipersensibilità a titanio puro, leghe di titanio (Ti6Al4V), oro, palladio, polietere etere chetone (PEEK) o iridio.

Avvertenze e precauzioni

QUESTE ISTRUZIONI NON HANNO LO SCOPO DI SOSTITUIRE UNA FORMAZIONE ADEGUATA.

- Ai fini di un uso sicuro ed efficace degli impianti dentali, si raccomanda vivamente di seguire una formazione specialistica che comprenda una parte pratica, per apprendere la tecnica specifica, i requisiti biomeccanici e le valutazioni radiografiche.
- I prodotti devono essere tenuti al sicuro dall'aspirazione quando vengono maneggiati intraoralmente. L'aspirazione dei prodotti può portare a infezioni o lesioni fisiche indesiderate.

Il medico è responsabile della corretta selezione dei pazienti, della formazione adeguata, dell'esperienza nell'installazione degli impianti e nel fornire le informazioni appropriate per il consenso informato. Una tecnica sbagliata può causare il fallimento dell'impianto, danni a nervi/vasi sanguigni e/o perdita dell'osso di supporto. L'inefficacia degli impianti aumenta quando questi sono installati in ossa irradiate, in quanto la radioterapia può causare la progressiva fibrosi dei vasi e dei tessuti molli, riducendo la capacità di guarigione.

È importante essere consapevoli ed evitare di danneggiare strutture vitali come nervi, vene e arterie. Lesioni a strutture anatomiche vitali possono causare gravi complicazioni come lesioni all'occhio, danni ai nervi e sanguinamento eccessivo. È essenziale proteggere il nervo infraorbitale. La mancata identificazione delle misure reali rispetto ai dati radiografici potrebbe portare a complicazioni.

I nuovi utenti di Impianti, e quelli con esperienza, dovrebbero ricevere la formazione adeguata prima di utilizzare un nuovo sistema o di procedere con un nuovo metodo di trattamento. Prestare particolare attenzione quando si trattano pazienti con fattori locali o sistemici che potrebbero influenzare la guarigione dell'osso e dei tessuti molli (ad esempio, scarsa igiene orale, diabete non controllato, terapia con steroidi, fumatori, infezioni nell'osso vicino e pazienti sottoposti a radioterapia orofacciale).

Deve essere eseguito uno screening approfondito dei potenziali candidati all'impianto che includa:

- storia clinica e dentale completa;
- ispezione visiva e radiologica per determinare le dimensioni ossee adeguate, i punti di riferimento anatomici, le condizioni occlusali e lo stato di salute parodontale;
- è necessario considerare bruxismo e relazioni tra mascelle negative;
- una corretta pianificazione preoperatoria con un buon approccio di squadra tra chirurghi, restauratori e tecnici di laboratorio ben preparati è essenziale per il successo del trattamento implantare;
- minimizzare il trauma al tessuto dell'ospite aumenta le possibilità di un'osteointegrazione di successo;
- l'elettrochirurgia non deve essere praticata in prossimità di impianti metallici, poiché questi sono conduttivi.

Se il dispositivo non funziona come previsto, deve essere segnalato al produttore del dispositivo. Le informazioni di contatto del produttore di questo dispositivo per segnalare una variazione delle prestazioni sono: sicomplaints@southernimplants.com.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali dell'uso del sistema non sono differenti da quelli della terapia implantare. I possibili effetti collaterali della terapia implantare comprendono:

- dolore
- gonfiore
- difficoltà fonetiche
- infiammazione gengivale

Sintomi meno comuni ma più persistenti includono, ma non sono limitati a:

- reazioni allergiche al materiale dell'impianto e/o del moncone
- rottura dell'impianto e/o del moncone
- allentamento della vite del moncone e/o della vite di fissaggio
- infezione che richiede la revisione dell'impianto dentale
- danni ai nervi con conseguente debolezza, intorpidimento o dolore permanenti
- risposte istologiche con possibile coinvolgimento di macrofagi e/o fibroblasti
- formazione di emboli di grasso
- allentamento dell'impianto che richiede un intervento di revisione
- perforazione del seno mascellare
- perforazione delle placche labiali e linguali
- perdita di tessuto osseo che può comportare la revisione o la rimozione dell'impianto.

Precauzioni: mantenimento del protocollo di sterilità

Gli impianti sono imballati come segue:

1. Una confezione esterna costituita da una scatola rigida trasparente, che protegge la confezione interna.
2. La confezione interna è costituita da un blister (blister trasparente plastificato con un coperchio TYVEK rimovibile).
3. All'interno della confezione interna è presente un tubo cavo che contiene un impianto sospeso da un anello in titanio: ciò garantisce che l'impianto non tocchi mai l'interno del tubo di plastica.
4. Le informazioni di etichettatura sono riportate sulla superficie del coperchio rimovibile e sull'esterno della scatola rigida.

Fare attenzione a preservare la sterilità dell'impianto, aprendo correttamente la confezione e manipolando l'impianto in modo appropriato.

1. Aprire la confezione dell'impianto nel campo non sterile con guanti non sterili, strappare l'etichetta dell'indirizzo per aprire la confezione.
2. Con guanti non sterili, rimuovere il blister interno. Non posizionare la confezione in plastica o il coperchio del blister sul campo sterile. I contenuti di questa confezione interna sono sterili.
3. Il blister sigillato deve essere aperto da un assistente (con guanti non sterili): rimuovere il coperchio in TYVEK e far cadere o posizionare la provetta sterile sul campo sterile, aprire il tappo della provetta e collegare lo strumento di posizionamento dell'impianto sull'impianto e rimuovere con attenzione dalla provetta sterile. Non toccare l'impianto sterile.

Altri componenti sterili sono situati all'interno di una base a sacchetto o blister dotata di un coperchio "rimovibile". Le informazioni di etichettatura sono situate nella metà inferiore del sacchetto, all'interno della confezione o sulla superficie del coperchio rimovibile. La sterilità è garantita a condizione che il sacchetto non sia danneggiato o aperto. I componenti non sterili sono forniti puliti ma non sterili all'interno di una base a sacchetto o blister dotata di coperchio rimovibile. Le informazioni di etichettatura sono situate nella metà inferiore del sacchetto o sulla superficie del coperchio rimovibile.

Avvertenza relativa a incidenti gravi

Gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere comunicati al produttore dello stesso e all'autorità competente nello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Le informazioni di contatto del produttore di questo dispositivo per segnalare un incidente grave sono le seguenti: sicomplaints@southernimplants.com.

Materiali

Tipo di materiale Titanio commercialmente puro (grado 4, ASTM F67 e ISO5832-2, UTS $\geq$ 900 MPa)

Smaltimento

Smaltimento del dispositivo e della relativa confezione: seguire le normative e i requisiti ambientali locali, tenendo conto dei differenti livelli di contaminazione. Quando si smaltiscono gli oggetti usati, fare attenzione a trapani e strumenti affilati. Utilizzare sempre DPI idonei.

Sicurezza MR

I test non clinici hanno dimostrato che gli impianti dentali, i monconi metallici e le viti protesi che Southern Implants® sono condizionati dalla risonanza magnetica.

Un paziente con questo tipo di dispositivi può essere scannerizzato in modo sicuro in un sistema di risonanza magnetica che garantisca le seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico di 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.
- Campo magnetico a gradiente spaziale massimo di 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- Il sistema MR massimo ha riportato il SAR corrispondente alla modalità operativa normale per tutti i punti di riferimento (SAR della testa di 3,2 W/kg per il punto di riferimento della testa, 2 W/kg per il corpo intero e SAR parziale appropriato per gli altri punti di riferimento). Per le immagini di punti di riferimento al di sopra del torace, un tempo di scansione continuo di 15 minuti richiederà un ritardo di raffreddamento di almeno 5 minuti.
- Nei test non clinici, l'artefatto d'immagine causato dal dispositivo si estende a circa 20 mm dagli impianti dentali, dai monconi e dalle viti protesiche di Southern Implants, quando l'immagine è stata acquisita con una sequenza di impulsi ad eco gradiente e un sistema di MRI da 3,0 Tesla.

Le protesi rimovibili devono essere tolte prima della scansione, come si fa per gli orologi, i gioielli ecc.

Se l'etichetta del prodotto non riporta il simbolo MR, si prega di notare che questo dispositivo non è stato valutato per la sicurezza e la compatibilità nell'ambiente MR.

Riassunto della Sicurezza e delle Prestazioni Cliniche (SSCP)

Come richiesto dal Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR; EU2017/745), è disponibile un Riassunto della Sicurezza e delle Prestazioni Cliniche (SSCP) per le gamme di prodotti Southern Implants®.

Il relativo SSCP è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

NOTA: il sito web di cui sopra sarà disponibile dopo il lancio della Banca Dati Europea sui Dispositivi Medici (EUDAMED).

Esonero da responsabilità

Questo prodotto fa parte della gamma di prodotti Southern Implants® e deve essere utilizzato solo con i prodotti originali associati e secondo le raccomandazioni riportate nei singoli cataloghi dei prodotti. L'utilizzatore di questo prodotto deve studiare lo sviluppo della gamma di prodotti Southern Implants® e assumersi la piena responsabilità delle indicazioni e dell'uso corretto di questo prodotto. Southern Implants® non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a un uso non corretto. Si prega di notare che alcuni prodotti Southern Implants® potrebbero non essere autorizzati o messi in vendita in tutti i mercati.

UDI di base

Prodotto	Numero UDI di base
UDI di Base per impianti dentali generici	6009544038699H

Letteratura correlata e cataloghi

CAT-2020 - Catalogo dei Prodotti per Impianti Hex Esterni

CAT-2095 - Catalogo dei Prodotti per Impianti INVERTA® Hex Esterni

Simboli e avvertenze

											
Produttore: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, Sudafrica. Tel: +27 12 667 1046	Marchio CE 2797	Dispositivo di prescrizione*	Sterilizzato per irradiazione	Non sterile	Data di utilizzo (mm- aa)	Non riutilizzare	Non risterilizzare	Numero di catalogo	Codice lotto	Dispositivo medico	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
											
Rappresentante autorizzato per la Svizzera	Data di produzione	Condizionato dalla Risonanza Magnetica	Risonanza Magnetica sicura	Singolo sistema di barriera sterile con imballo protettivo all'interno	Sistema di barriera sterile singolo	Consultare le istruzioni per l'uso	Attenzione	Tenere lontano dalla luce del sole	Non usare se la confezione è danneggiata		

* Dispositivo soggetto a prescrizione: Solo Rx. Attenzione: In base alla legge federale degli Stati Uniti, questo dispositivo può essere venduto esclusivamente da medici o su presentazione di prescrizione medica.

Esenzione della licenza in Canada: Si prega di notare che non tutti i prodotti possono essere stati concessi in licenza in conformità con la legge canadese.

Tutti i diritti riservati. Southern Implants®, il logo di Southern Implants® e tutti gli altri marchi utilizzati in questo documento sono, se non viene indicato altro o se non è evidente dal contesto in un determinato caso, marchi di Southern Implants®. Le immagini del prodotto di questo documento hanno solo uno scopo illustrativo e non rispettano necessariamente il prodotto nella sua scala corretta. È responsabilità del medico controllare i simboli che appaiono sulla confezione del prodotto in uso.

Description

L'implant à hexagone externe est un implant autotaraudeur en titane commercialement pur de grade 4 (UTS $\geq$ 900 MPa). Les implants sont disponibles avec une forme de corps effilé ou à parois parallèles. Tous les implants présentent une surface rugueuse jusqu'au collet, à l'exception des implants MSc qui ont une surface MSc de 3 mm au niveau coronaire. La surface rugueuse a une valeur Sa de 1,4 microns. L'implant à hexagone externe est également disponible avec la plateforme angulée Co-Axis®. Avec des inclinaisons de la plateforme intégrée de 12 °, 24 ° et 36 °, cette conception permet d'incliner l'implant sans compromettre l'angle d'émergence de la restauration.

Usage prévu

Ce système est conçu pour simplifier le traitement des patients partiellement ou totalement édentés qui sont éligibles à la pose d'un ou plusieurs implants dentaires. Ces implants servent de fixation pour des restaurations prothétiques permanentes ou amovible, telles que des couronnes dentaires, des prothèses dentaires partielles ou complètes, que ce soit dans la mâchoire supérieure ou inférieure.

Ces dispositifs sont conçus pour être implantés dans un site préalablement fraisé dans l'os alvéolaire où ils s'ostéointègrent (formant ainsi une connexion rigide avec l'os), et un pilier est fixé pour la rétention d'une prothèse.

Ces dispositifs permettent une restauration prothétique immédiate ou différée selon l'évaluation de l'éligibilité du patient par l'utilisateur.

Les composants du système sont classés en tant que dispositifs médicaux et sont réservés à l'utilisation par un seul patient.

Mode d'emploi

Les implants à hexagone externe de Southern Implants sont destinés à être chirurgicalement placés dans la mâchoire supérieure ou inférieure, offrant ainsi une solution de fixation prothétique pour les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires, que ce soit avec une charge différée ou immédiate. Les implants à hexagone externe de Southern Implants sont conçus pour une fonction immédiate lorsqu'une stabilité primaire adéquate est obtenue, accompagnée d'une charge occlusale appropriée.

Utilisateur concerné

Chirurgiens maxillo-faciaux, dentistes généralistes, orthodontistes, parodontistes, prosthodontistes, et autres utilisateurs d'implants dûment formés et expérimentés.

Environnement d'utilisation prévu

Les dispositifs sont destinés à être utilisés dans un environnement clinique tel qu'un bloc opératoire ou une salle de consultation d'un dentiste.

Population de patients prévue

Ce dispositif est utilisé pour la restauration dentaire de patients partiellement ou totalement édentés au niveau de la mâchoire supérieure ou inférieure. Les restaurations peuvent comprendre des dents individuelles, des ponts partiels ou complets et elles peuvent être fixes ou amovibles.

Informations sur la compatibilité

Les implants Southern Implants doivent être restaurés avec des composants Southern Implants. Utilisez des composants compatibles avec le type de connexion et la plateforme prothétique appropriés lors de la restauration des implants à hexagone externe. Pour plus d'informations, veuillez consulter les catalogues de produits (CAT-2020 et CAT-2095).

Tableau A – Gamme d'implants hexagonaux externes

Code d'article	MSc	Conique/Cylindrique	Diamètre de l'implant (mm)	Tailles de l'implant (mm)
Implants réguliers				
Droits				
IP	✓	Effilé	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Cylindrique	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Effilé	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBS	✓	Cylindrique	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cylindrique	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBT	✓	Effilé	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Cylindrique	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Effilé	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Effilé	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Effilé	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Effilé	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Effilé	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Effilé	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Effilé	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Effilé	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Effilé	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Implants INVERTA®				
Droits				
IV-EX30-37		Effilé	Ø 3,0 – Ø 3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Effilé	Ø 3,5 – Ø 4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Effilé	Ø 4,0 – Ø 5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Effilé	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Effilé	Ø 3,0 – Ø 3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Effilé	Ø 3,5 – Ø 4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Effilé	Ø 4,0 – Ø 5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Effilé	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Effilé	Ø 3,0 – Ø 3,7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Effilé	Ø 3,5 – Ø 4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Effilé	Ø 4,0 – Ø 5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Effilé	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Effilé	Ø 3,0 – Ø 3,7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Effilé	Ø 3,5 – Ø 4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Effilé	Ø 4,0 – Ø 5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Effilé	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
Implants à empreinte interne et hexagone externe				
INPI		Cylindrique	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Cylindrique	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Effilé	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cylindrique	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Effilé	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cylindrique	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Effilé	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

REMARQUE : Tous les produits ne sont pas autorisés à la vente dans tous les pays.

Avantages cliniques

Parmi les avantages cliniques, figurent l'amélioration de la fonction masticatoire, de la parole, de l'esthétique et du bien-être psychologique du patient grâce à la thérapie par implant dentaire. Grâce à cette procédure dentaire, les patients peuvent s'attendre à ce que leurs dents manquantes soient remplacées et/ou à ce que leurs couronnes soient restaurées.

Stockage, nettoyage et stérilisation

Ce composant est livré stérile (stérilisé par irradiation gamma) et doit être utilisé une seule fois avant la date de péremption (veuillez consulter l'étiquette de l'emballage). Le produit reste stérile tant que son récipient ou son scellé n'est pas endommagé ou ouvert. En cas de dommage à l'emballage, n'utilisez pas le produit. Contactez immédiatement votre représentant Southern ou retournez-le à Southern Implants®. Les appareils doivent être stockés dans un endroit sec, à température ambiante, et à l'abri de la lumière directe du soleil. Un stockage inadéquat peut influencer les caractéristiques de l'appareil. Ne pas réutiliser les composants conçus pour un usage unique. La réutilisation de ces composants peut avoir les conséquences suivantes :

- des dommages à la surface ou des altérations des dimensions critiques peuvent entraîner une détérioration des performances et de la compatibilité.
- un risque accru d'infection et de contamination croisée des patients si des articles à usage unique sont réutilisés.

Southern Implants® décline toute responsabilité en cas de complications liées à la réutilisation de composants.

Contre-indications

Les contre-indications à la thérapie implantaire comprennent :

- des patients médicalement inaptes aux interventions chirurgicales orales.
- dans les cas où il est possible de poser un nombre insuffisant d'implants, pouvant toutefois limiter le soutien fonctionnel de la prothèse.
- des patients âgés de moins de 18 ans.
- des patients présentant une déficience osseuse.
- des patients souffrants de troubles sanguins.
- la présence d'une infection à l'emplacement de l'implant.
- des patients souffrant de troubles vasculaires.
- des patients souffrant de diabète non contrôlé.
- des patients souffrant de toxicomanie ou d'alcoolisme.
- des patients recevant un traitement chronique à base de fortes doses de corticoïdes.
- des patients suivant un traitement anticoagulant.
- des patients souffrant d'une maladie métabolique osseuse.
- des patients qui suivent actuellement un traitement de radiothérapie.
- des patients présentant des allergies ou une hypersensibilité au titane pur, à l'alliage de titane (Ti6Al4V), à l'or, au palladium, au polyétheréthercétone (PEEK) ou à l'iridium.

Mises en garde et précautions

CE MANUEL D'UTILISATION N'EST PAS CENSÉ REMPLACER UNE FORMATION ADÉQUATE.

- Pour une utilisation sûre et efficace des implants dentaires il est suggéré d'entreprendre une formation spécialisée, notamment une formation pratique pour apprendre les techniques adaptées, les exigences biomécaniques et les évaluations radiographiques.
- Les produits doivent être protégés contre toute aspiration lorsqu'ils sont manipulés par voie intra-orale. L'aspiration de produits peut entraîner une infection ou une blessure physique imprévue.

Il incombe au praticien d'assumer la responsabilité de la sélection appropriée des patients, de la formation adéquate, de l'expérience en placement d'implants, et de fournir les informations nécessaires pour obtenir un consentement éclairé. Une technique inappropriée peut conduire à l'échec de l'implant, à des dommages aux nerfs/vaisseaux et/ou à une perte de support osseux. La défaillance des implants augmente lorsque les implants sont placés dans un os irradié car la radiothérapie peut entraîner une fibrose progressive des vaisseaux et des tissus mous, entraînant une diminution de la capacité de cicatrisation.

Il est essentiel de prévenir tout dommage aux structures vitales telles que les nerfs, les veines et les artères. Les lésions des structures anatomiques vitales peuvent entraîner de graves complications telles que des lésions oculaires, des lésions nerveuses et des hémorragies excessives. La protection du nerf infra-orbitaire est indispensable. Ne pas être en mesure d'identifier les mesures réelles par rapport aux données radiographiques pourrait entraîner des complications.

Les utilisateurs d'implants novices et expérimentés doivent suivre une formation avant d'utiliser un nouveau système ou de tenter d'opter pour une nouvelle méthode de traitement. Accordez une attention particulière lors du traitement des patients présentant des facteurs locaux ou systémiques susceptibles d'affecter la régénération osseuse et des tissus mous. Cela inclut une mauvaise hygiène buccale, un diabète non contrôlé, une stéroïdothérapie, le tabagisme, une infection osseuse environnante et les patients ayant subi une radiothérapie oro-faciale.

Un bilan détaillé des candidats potentiels à l'implantation doit être effectué, y compris :

- l'ensemble des antécédents médicaux et dentaires.
- un examen visuel et radiologique pour déterminer les bonnes dimensions des os, les repères anatomiques, les conditions occlusales et la santé parodontale.
- le bruxisme et les relations maxillaires défavorables doivent être prises en compte.
- une bonne planification préopératoire avec une bonne approche d'équipe entre des chirurgiens, des dentistes restaurateurs et des techniciens de laboratoire bien formés est essentielle pour un traitement implantaire réussi
- minimiser le traumatisme du tissu hôte permet d'augmenter le potentiel de réussite de l'ostéointégration.
- l'électrochirurgie ne doit pas être tentée autour des implants métalliques car ceux-ci sont conductibles.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez en informer le fabricant. Voici les coordonnées du fabricant de cet appareil pour signaler un changement de performance : sicomplaints@southernimplants.com.

Effets secondaires

Les effets indésirables de l'utilisation du système ne diffèrent pas de ceux de la thérapie par implants dentaires. Les effets indésirables possibles du traitement par implant peuvent inclure :

- douleur
- enflure
- difficultés phonétiques
- gingivite

Parmi les symptômes moins courants mais plus persistants, il est à noter, sans toutefois s'y limiter :

- réaction(s) allergique (s) au matériel d'implant et/ou du pilier
- rupture de l'implant et/ou du pilier
- desserrage du pilier visé et/ou de la vis de retenue
- infection nécessitant une révision de l'implant dentaire
- lésions nerveuses pouvant provoquer une faiblesse permanente, un engourdissement ou des douleurs
- réponses histologiques, éventuellement avec une incidence sur les macrophages et/ou les fibroblastes
- formation d'embolies graisseuses
- desserrage de l'implant nécessitant une chirurgie de révision
- perforation du sinus maxillaire
- perforation des plaques labiales et linguales
- perte osseuse pouvant entraîner une révision ou un retrait de l'implant.

Mise en garde : maintien du protocole de stérilisation

Les implants sont conditionnés comme suit :

1. Un emballage extérieur constitué d'une boîte rigide et transparente qui sert de protection pour l'emballage intérieur
2. L'emballage intérieur se compose d'un blister (base de blister en plastique transparent avec un couvercle "amovible" TYVEK).
3. Dans l'emballage intérieur se trouve un tube creux qui contient un implant suspendu à un anneau en titane, ce qui garantit que l'implant, ne touche jamais l'intérieur du tube en plastique.

4. Les informations d'étiquetage se trouvent sur la surface du couvercle amovible et sur l'extérieur de la boîte rigide.

Il faut veiller à maintenir la stérilité de l'implant en ouvrant correctement l'emballage et en manipulant l'implant.

1. Ouvrir l'emballage de l'implant dans le champ non stérile, avec des gants non stériles, détacher l'étiquette d'adresse pour ouvrir la boîte.
2. Avec des gants non stériles, retirez le blister interne. Ne placez pas la boîte en plastique ou le couvercle du blister sur le champ stérile. Le contenu de cet emballage intérieur est stérile.
3. Le blister scellé doit être ouvert par un assistant (avec des gants non stériles), retirez le couvercle TYVEK et déposez ou placez le tube stérile sur le champ stérile, ouvrez le capuchon du tube, ensuite fixez l'outil de placement de l'implant sur l'implant et retirez soigneusement du tube stérile. Ne touchez pas à l'implant stérile.

Les autres composants stériles sont emballés dans une enveloppe pelable ou un blister avec un couvercle « amovible ». Les informations d'étiquetage se trouvent sur la moitié inférieure de l'enveloppe, à l'intérieur de l'emballage ou sur la surface du couvercle amovible. La stérilité est garantie à condition que le sachet n'ait pas été endommagé ou ouvert. Les composants non stériles sont fournis propres mais non stériles dans une enveloppe pelable un emballage blister avec couvercle amovible. Les informations d'étiquetage se trouvent sur la moitié inférieure de l'enveloppe ou sur la surface du couvercle amovible.

Remarque concernant les incidents graves

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant du dispositif et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

Les coordonnées du fabricant de ce dispositif pour signaler un incident grave sont les suivantes : sicomplaints@southernimplants.com.

Matériaux

Type de matériau Titane commercialement pur (grade 4, ASTM F67 et ISO5832-2, UTS ≥ 900 MPa)

Élimination

L'élimination du dispositif et de son emballage doit se conformer aux réglementations locales et aux exigences environnementales, en tenant compte des différents niveaux de contamination. Lorsque vous éliminez des objets usagés, assurez-vous de faire attention aux forêts et aux instruments tranchants. Un équipement de protection individuelle adéquat doit être porté en permanence.

Sécurité MR

Des essais non cliniques ont confirmé que les implants dentaires Southern Implants®, les piliers métalliques et les vis prothétiques sont compatibles avec l'imagerie par Résonance Magnétique (IRM).

Un patient porteur de ces implants peut en toute sécurité bénéficier d'une IRM dans les conditions suivantes :

- uniquement dans un champ magnétique statique de 1,5 Tesla et 3,0 Tesla.
- un gradient spatial maximal de champ magnétique de 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- système MR maximum a enregistré un DAS correspondant au mode de fonctionnement normal pour tous les points de repère (DAS de la tête de 3,2 W/kg au niveau du point de repère de la tête, 2 W/kg pour le corps entier, et un DAS partiel approprié pour les autres points de repère). Pour l'imagerie des points de repère situés au-dessus du thorax, un balayage continu de 15 minutes nécessitera un temps de refroidissement d'au moins 5 minutes.
- dans les essais non cliniques, lorsque le dispositif est imagé avec une séquence d'impulsions d'écho de gradient et un système d'IRM de 3,0 Tesla, l'artefact d'image s'étend à environ 20 mm des implants dentaires, des piliers, et des vis prothétiques des implants Southern.

Préalablement à la numérisation, il convient d'ôter les restaurations amovibles, de manière similaire à la procédure appliquée pour les montres, les bijoux, et autres.

Si le produit ne comporte pas de symbole MR sur son étiquette, veuillez noter que sa sécurité et sa compatibilité dans un environnement MR n'ont pas été évaluées.

Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (RCSPC)

Conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR ; EU2017/745), un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (RCSCP) est disponible pour consultation concernant la gamme de produits de Southern Implants®.

Le RCSP pertinent peut être consulté à l'adresse suivante <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

REMARQUE : le site web ci-dessus sera disponible dès le lancement de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED).

Clause de non-responsabilité

Ce produit est inclus dans la gamme de produits Southern Implants® et doit être utilisé exclusivement avec les produits originaux associés, conformément aux recommandations figurant dans les catalogues des produits individuels. L'utilisateur de ce produit doit examiner le développement de la gamme de produits Southern Implants® et assumer la pleine responsabilité des indications et de l'utilisation correctes de ce produit. Southern Implants® n'assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte. Veuillez noter que certains produits Southern Implants® pourraient ne pas être autorisés ou disponibles à la vente dans tous les marchés.

UDI de base

Produit	Numéro de l'UDI de base
UDI de base pour les implants dentaires généraux	6009544038699H

Littérature connexe et catalogues

CAT-2020 - Catalogue de produits d'implants Hexagonal externe

CAT-2095 - Catalogue de produits d'implants Hexagonal externe INVERTA®

Symboles et avertissements

											
Fabricant : Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, Afrique du Sud Tél. : +27 12 667 1046	Marquage CE 2797	Dispositif sur ordonnance*	Stérilisé par irradiation	Non-stérile	Date limite d'utilisation (mm/aaaa)	Ne pas réutiliser	Ne pas restériliser.	Numéro de catalogue	Code lot	Dispositif médical	Représentant désigné pour la communauté Européenne
											
Représentant désigné pour la Suisse	Date de fabrication	Résonance magnétique conditionnelle	Résonance magnétique sûre	Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'intérieur	Système de barrière stérile simple	Consultez le mode d'emploi	Attention !	Conserver à l'écart de la lumière du soleil	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		

* Dispositif sur ordonnance : Prescription uniquement. Avertissements : Conformément à la loi fédérale, la vente de cet appareil doit être effectuée par ou sur l'ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Exemption de licence pour le Canada : Veuillez noter que tous les produits peuvent ne pas avoir été autorisés conformément à la législation canadienne.

Tous droits réservés. Southern Implants®, son logo, Southern Implants® ainsi que toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document, sont des marques commerciales de Southern Implants®, sauf indication contraire ou évidence dans le contexte. Les images du produit présentées dans ce document sont uniquement à des fins d'illustration et ne représentent pas nécessairement le produit avec précision à l'échelle. Il incombe au clinicien de vérifier les symboles figurant sur l'emballage du produit pendant son utilisation.

Beschreibung

Das Außensechskant-Implantat ist ein selbstschneidendes Implantat aus handelsüblichem Reintitan Grad 4 (UTS $\geq$ 900 MPa). Die Implantate sind entweder mit einer konischen oder parallelwandigen Körperform erhältlich. Alle Implantate sind bis zum Kragen aufgeraut, mit Ausnahme der Implantate in der MSc-Version, die koronal eine 3 mm dicke MSc-Oberfläche aufweisen. Die Oberfläche hat einen Sa-Wert von 1,4 Mikrometern. Das Außensechskant-Implantat ist auch im Co-Axis®-Design mit abgewinkelter Plattform erhältlich. Mit einer eingebauten Plattformabwinkelung von 12°, 24° und 36° ermöglicht dieses Design eine Kippung des Implantats, ohne den Durchtrittswinkel der Restauration zu beeinträchtigen.

Verwendungszweck

Dieses System ist zur Unterstützung bei der Behandlung von teilweise oder vollständig zahnlosen Patienten bestimmt, die für das Einsetzen eines oder mehrerer Zahnimplantate in Frage kommen, um einen dauerhaften oder herausnehmbaren Einzelkronen-, Teil- oder Vollprothesenersatz im Ober- oder Unterkiefer zu befestigen.

Diese Geräte werden in eine vorgebohrte Stelle im Alveolarknochen eingesetzt, wo sie osseointegrieren (eine starre Verbindung mit dem Knochen bilden) und ein Abutment zur Befestigung einer Prothese angebracht wird.

Die Geräte ermöglichen eine sofortige oder verzögerte prothetische Restauration, je nachdem, wie der Anwender die Eignung des Patienten einschätzt.

Die Systemkomponenten sind als Medizinprodukte eingestuft und zur einmaligen Anwendung an einem einzigen Patienten bestimmt.

Indikationen für die Verwendung

Die Außensechskant-Implantate von Southern Implants sind für die chirurgische Insertion im Ober- oder Unterkiefer vorgesehen, um eine prothetische Befestigung von Kronen, Brücken oder Deckprothesen mit verzögerter oder sofortiger Belastung zu ermöglichen. Die Außensechskant-Implantate von Southern Implants sind für die sofortige Funktion vorgesehen, wenn eine gute Primärstabilität mit angemessener okklusaler Belastung erreicht wird.

Vorgesehene Benutzer

Zahntechniker, Kieferchirurgen, Allgemeinzahnärzte, Kieferorthopäden, Parodontologen, Prothetiker und andere entsprechend ausgebildete und erfahrene Implantatanwender.

Vorgesehene Einsatzumgebung

Die Geräte sind für die Verwendung in einer klinischen Umgebung wie einem Operationssaal oder einem zahnärztlichen Behandlungszimmer.

Vorgesehene Patientenpopulation

Dieses Gerät wird bei der Zahnrestauration von teilweise oder ganz zahnlosen Patienten im Ober- oder Unterkiefer eingesetzt. Der Zahnersatz kann aus einzelnen Zähnen, Teil- oder Vollbrücken bestehen und kann feststehend oder herausnehmbar sein.

Kompatibilitätsinformationen

Die Implantate von Southern Implants sollten mit Southern-Komponenten versorgt werden. Bei der Restauration von Außensechskant-Implantaten sind die dem Verbindungstyp und der prothetischen Plattform entsprechenden Komponenten zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Produktkatalogen (CAT-2020 & CAT-2095).

Tabelle A - Außensechskant-Implantatreihe

Artikel Code	MSc	Kegelförmig/zylindrisch	Implantat-Durchmesser (mm)	Implantat-Längen (mm)
Reguläre Implantate				
Gerade				
IP	✓	Kegelförmig	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Zylindrisch	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Kegelförmig	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

IBS	✓	Zylindrisch	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Zylindrisch	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBT	✓	Kegelförmig	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Zylindrisch	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Kegelförmig	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Kegelförmig	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Kegelförmig	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Kegelförmig	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Kegelförmig	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Kegelförmig	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Kegelförmig	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Kegelförmig	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Kegelförmig	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Implantate				
Gerade				
IV-EX30-37		Kegelförmig	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Kegelförmig	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Kegelförmig	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Kegelförmig	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Kegelförmig	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Kegelförmig	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Kegelförmig	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Kegelförmig	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Kegelförmig	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Kegelförmig	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Kegelförmig	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Kegelförmig	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Kegelförmig	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Kegelförmig	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Kegelförmig	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Kegelförmig	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
Außensechskant-Implantate mit Innenantrieb				
INPI		Zylindrisch	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Zylindrisch	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Kegelförmig	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Zylindrisch	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Kegelförmig	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Zylindrisch	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Kegelförmig	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

Anmerkung: Nicht alle Produkte sind für den Verkauf in allen Ländern zugelassen.

Klinischer Nutzen

Zu den klinischen Vorteilen der Zahnimplantattherapie gehören die Verbesserung der Kaufunktion, der Sprache, der Ästhetik und des psychischen Wohlbefindens der Patienten. Durch dieses Verfahren können die Patienten erwarten, dass ihre fehlenden Zähne ersetzt und/oder Kronen wiederhergestellt werden.

Lagerung, Reinigung und Sterilisation

Die Komponente wird steril geliefert (durch Gammabestrahlung sterilisiert) und ist für den einmaligen Gebrauch vor Ablauf des Verfallsdatums bestimmt (siehe Verpackungsetikett). Die Sterilität ist gewährleistet, sofern der Behälter oder das Siegel nicht beschädigt oder geöffnet wird. Wenn die Verpackung beschädigt ist verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Southern-Vertreter oder senden Sie es an Southern Implants® zurück. Die Geräte müssen an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden und dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Eine falsche Lagerung kann die Geräteeigenschaften beeinflussen. Komponenten, die nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung dieser Komponenten kann zu den nachstehenden Folgen führen

- Schäden an der Oberfläche oder an kritischen Abmessungen, die zu einer Verschlechterung der Leistung und Kompatibilität führen können.
- erhöht das Risiko von Kreuzinfektionen und Kontaminationen, wenn Einwegartikel wiederverwendet werden.

Southern Implants® übernimmt keine Verantwortung für Komplikationen im Zusammenhang mit wiederverwendeten Einwegkomponenten.

Kontraindikationen

Zu den Kontraindikationen für eine Implantattherapie gehören:

- Patienten, die medizinisch nicht für oralchirurgische Eingriffe geeignet sind.
- wo eine unzureichende Anzahl von Implantaten gesetzt werden kann, was die funktionelle Unterstützung der Prothese einschränkt.
- Minderjährige Patienten unter 18 Jahren.
- Patienten mit schlechter Knochenqualität.
- Patienten mit Blutkrankheiten.
- Vorhandensein einer Infektion an der Implantatstelle.
- Patienten mit vaskulären Beeinträchtigungen.
- Patienten mit unkontrolliertem Diabetes.
- Patienten mit Drogen- oder Alkoholmissbrauchsabhängigkeit.
- Patienten, die sich einer chronischen hochdosierten Steroidtherapie unterziehen.
- Patienten, die eine gerinnungshemmende Therapie erhalten.
- Patienten mit metabolischer Knochenerkrankung.
- Patienten, die sich einer Strahlentherapie unterziehen.
- Patienten mit Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen Reintitan, Titanlegierungen (Ti6Al4V), Gold, Palladium, Polyetheretherketon (PEEK) oder Iridium.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

DIESE ANLEITUNGEN SIND NICHT ALS ERSATZ FÜR EINE ANGEMESSENE SCHULUNG VORGEGEHEN.

- Für den sicheren und effektiven Einsatz von Zahnimplantaten wird empfohlen, eine spezielle Schulung durchzuführen, einschließlich einer praktischen Schulung um die richtige Technik, die biomechanischen Anforderungen und die röntgenologische Beurteilung zu erlernen.
- Die Produkte müssen gegen Aspiration gesichert werden, wenn sie intraoral gehandhabt werden. Die Aspiration von Produkten kann zu Infektionen oder ungeplanten körperlichen Verletzungen führen.

Die Verantwortung für die richtige Auswahl der Patienten, eine angemessene Schulung, Erfahrung beim Einsetzen von Implantaten und die Bereitstellung geeigneter Informationen für eine informierte Zustimmung liegt beim Praktiker. Eine unsachgemäße Technik kann zum Implantatversagen, zur Schädigung von Nerven/Gefäßen und/oder zum Verlust des stützenden Knochens führen. Implantatversagen nimmt zu, wenn Implantate in bestrahlten Knochen eingesetzt werden, da die Strahlentherapie zu einer fortschreitenden Fibrose der Gefäße und des Weichgewebes führen kann, was die Heilungsfähigkeit beeinträchtigt.

Es ist wichtig, auf die Schädigung lebenswichtiger Strukturen wie Nerven, Venen und Arterien zu achten und diese zu vermeiden. Verletzungen lebenswichtiger anatomischer Strukturen können zu schwerwiegenden Komplikationen wie Verletzungen des Auges, Nervenschäden und übermäßigen Blutungen führen. Es ist wichtig, den Nervus infraorbitalis

zu schützen. Werden die tatsächlichen Maße im Vergleich zu den Röntgendaten nicht ermittelt, kann dies zu Komplikationen führen.

Neue und erfahrene Implantatanwender sollten eine Schulung durchführen, bevor sie ein neues System verwenden oder versuchen, eine neue Behandlungsmethode anzuwenden. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung von Patienten mit lokalen oder systemischen Faktoren, die die Heilung des Knochens und des Weichgewebes beeinträchtigen könnten (z. B. schlechte Mundhygiene, unkontrollierter Diabetes, Steroidtherapie, Raucher, Infektionen im benachbarten Knochen und Patienten, die eine orofaziale Strahlentherapie erhalten haben).

Es muss ein gründliches Screening der potenziellen Implantatkandidaten durchgeführt werden, einschließlich:

- umfassende medizinische und zahnärztliche Anamnese
- visuelle und radiologische Inspektion zur Bestimmung der ausreichenden Knochendimensionen, der anatomischen Orientierungspunkte, der okklusalen Bedingungen und der parodontalen Gesundheit.
- Bruxismus und ungünstige Kieferrelationen müssen berücksichtigt werden.
- eine gute präoperative Planung mit einem guten Teamansatz zwischen gut ausgebildeten Chirurgen, restaurativen Zahnärzten und Labortechnikern ist für eine erfolgreiche Implantatbehandlung unerlässlich.
- die Minimierung des Traumas für das Wirtsgewebe erhöht das Potenzial für eine erfolgreiche Osseointegration.
- elektrochirurgie sollte nicht um Metallimplantate herum durchgeführt werden da diese leitfähig sind.

Falls das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, muss dies beim Hersteller des Geräts gemeldet werden. Zur Meldung von Leistungsänderungen können Sie den Hersteller dieses Geräts unter folgender Adresse erreichen: sicomplaints@southernimplants.com.

Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen der Anwendung des Systems sind denen der Zahnimplantattherapie nicht unähnlich. Zu den möglichen Nebenwirkungen der Implantattherapie gehören:

- Schmerzen
- Schwellung
- phonetische Schwierigkeiten
- Zahnfleischentzündung

Zu den weniger häufigen, aber hartnäckigeren Symptomen gehören unter anderem:

- allergische Reaktion(en) auf das Implantat und/oder das Abutment-Material
- Bruch des Implantats und/oder des Abutments
- Lockerung der Abutmentschraube und/oder der Halteschraube
- Infektion, die eine Revision des Zahnimplantats erforderlich macht
- Nervenschäden, die zu dauerhafter Schwäche, Taubheit oder Schmerzen führen
- histologische Reaktionen mit möglicher Beteiligung von Makrophagen und/oder Fibroblasten
- Bildung von Fettembolien
- Lockerung des Implantats, die eine Revisionsoperation erfordert
- Perforation der Kieferhöhle
- Perforation der labialen und lingualen Platte
- Knochenverlust, der zu einer Revision oder Entfernung des Implantats führen kann.

Vorsichtsmaßnahmen: Aufrechterhaltung des Sterilitätsprotokolls

Die Implantate sind wie folgt verpackt:

1. Eine Außenverpackung, die aus einer starren, durchsichtigen Schachtel besteht, die als Schutz für die Innenverpackung dient.
2. Die Innenverpackung besteht aus einer Blisterpackung (durchsichtiger, kunststoffgeformter Blasenboden mit einem TYVEK "peel-back" Deckel).
3. In der Innenverpackung befindet sich ein hohles Rohr, in dem ein Implantat an einem Titanring aufgehängt ist, so dass das Implantat niemals das Innere des Kunststoffrohrs berührt.

- Die Etikettierungsinformationen befinden sich auf der Oberfläche des Peel-Back-Deckels und auf der Außenseite der starren Verpackung.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Sterilität des Implantats durch ordnungsgemäßes Öffnen der Verpackung und Handhabung des Implantats erhalten bleibt.

- Zum Öffnen der Implantatverpackung im unsterilen Bereich reißen Sie mit unsterilen Handschuhen das Sicherheitsetikett ab, um die Schachtel zu öffnen.
- Entfernen Sie die innere Blisterpackung mit unsterilen Handschuhen. Legen Sie die Kunststoffbox oder den Deckel der Blisterpackung nicht auf das sterile Feld. Der Inhalt dieser Innenverpackung ist steril.
- Der versiegelte Blister muss von einer Hilfsperson (mit unsterilen Handschuhen) geöffnet werden: den TYVEK-Deckel entfernen und das sterile Röhrchen auf das sterile Feld fallen lassen oder legen, die Röhrchenkappe öffnen und das Einsetzwerkzeug auf das Implantat aufsetzen und vorsichtig aus dem sterilen Röhrchen nehmen. Berühren Sie das sterile Implantat nicht.

Andere sterile Komponenten sind in einem Abziehbeutel oder einer Blasenbasis mit einem abziehbaren Deckel verpackt. Die Etikettierungsinformationen befinden sich auf der unteren Hälfte des Beutels, im Inneren der Verpackung oder auf der Oberfläche des Peel-Back-Deckels. Die Sterilität ist gewährleistet, solange der Beutel nicht beschädigt oder geöffnet wird. Unsterile Komponenten werden sauber, aber unsteril in einem Peel-Pouch-Blisterboden mit Peel-Back-Deckel geliefert. Die Etikettierungsinformationen befinden sich auf der unteren Hälfte des Beutels oder auf der Oberfläche des Peel-Back-Deckels.

Hinweis auf schwerwiegende Zwischenfälle

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller des Produkts und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Die Kontaktdaten des Herstellers dieses Produkts zur Meldung eines schwerwiegenden Zwischenfalls lauten wie folgt: sicomplaints@southernimplants.com.

Materialien

Materialtyp Handelsübliches Reintitan (Grad 4, ASTM F67 und ISO5832-2, UTS ≥ 900 MPa)

Entsorgung

Entsorgung des Geräts und seiner Verpackung: Die örtlichen Vorschriften und Umweltbestimmungen sind zu beachten, wobei unterschiedliche Verschmutzungsgrade zu berücksichtigen sind. Bei der Entsorgung von Altgeräten ist auf scharfe Bohrer und Instrumente zu achten. Es muss stets eine ausreichende PSA verwendet werden

MR-Sicherheit

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass die Zahnimplantate, metallischen Abutments und prothetischen Schrauben von Southern Implants® bedingt MR-sicher sind.

Ein Patient mit diesen Geräten kann sicher in einem MR-System gescannt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- nur statische Magnetfelder von 1,5 Tesla und 3,0 Tesla.
- maximales räumliches Gradientenmagnetfeld von 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- Maximale SAR-Werte des MR-Systems, die dem normalen Betriebsmodus für alle Landmarken entsprechen (Kopf-SAR von 3,2 W/kg für die Kopflandmarke, 2 W/kg für den ganzen Körper und angemessene Teilkörper-SAR für andere Landmarken). Bei einer kontinuierlichen Scandauer von 15 Minuten ist eine Kühlzeit von mindestens 5 Minuten erforderlich, um Landmarken oberhalb des Thorax abzubilden.
- In den nicht-klinischen Tests erstreckt sich das durch das Gerät verursachte Bildartefakt etwa 20 mm von den Southern Implants Zahnimplantaten, Abutments und Prothetischschrauben entfernt, wenn es mit einer Gradienten-Echo-Pulsfolge und einem 3,0-Tesla-MRT-System aufgenommen wird.

Herausnehmbare Restaurationen sollten vor dem Scannen herausgenommen werden, wie dies auch bei Uhren, Schmuck usw. der Fall ist.

Sollte auf dem Produktetikett kein MR-Symbol zu finden sein, beachten Sie bitte, dass dieses Gerät nicht auf Sicherheit und Kompatibilität in der MR-Umgebung geprüft wurde.

Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP)

Laut der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR; EU2017/745) ist eine Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP) für die Produktreihen von Southern Implants® zur Verfügung gestellt worden.

Der entsprechende SSCP kann unter folgender Adresse abgerufen werden <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

HINWEIS: Die oben genannte Website wird mit dem Start der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) verfügbar sein.

Haftungsausschluß

Dieses Produkt ist Teil der Produktpalette von Southern Implants® und sollte nur mit den dazugehörigen Originalprodukten und gemäß den Empfehlungen in den einzelnen Produktkatalogen verwendet werden. Der Benutzer dieses Produkts muss die Entwicklung der Southern Implants® Produktpalette studieren und die volle Verantwortung für die korrekte Indikation und Verwendung dieses Produkts übernehmen. Southern Implants® übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Bitte beachten Sie, dass einige Produkte von Southern Implants® möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen oder zum Verkauf freigegeben sind.

Basis-UDI

Produkt	Basis-UDI Nummer
Basis-UDI für Zahnimplantate	6009544038699H

Weiterführende Literatur und Kataloge

CAT-2020 - Produktkatalog für Außensechskant-Implantate

CAT-2095 - Produktkatalog für Außensechskant INVERTA® Implantate

Symbols und Warnhinweise

											
Hersteller: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, Südafrika Tel: +27 12 667 1046	CE- Kennzeich- nung	Verschreibung pflichtiges Produkt*	Sterilisation durch Bestrahlung	Nicht steril	Verfallsdatu m (mm-jj)	Nicht wiederverw enden	Nicht resterilisieren	Katalognummer	Chargencode	Medizinisches Gerät	Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
											
Zugelassener r Vertreter für die Schweiz	Herstellungs- datum	Magnetische Resonanz bedingt	Magnetisch e Resonanz sicher	Einzelnes Sterilbarrieresystem mit innenliegender Schutzverpackung	Einfaches Sterilbarrieres ystem	Konsultieren Sie die Gebrauchsanwei- sung	Achtung	Von Sonnenlicht fernhalten	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.		

* Verschreibungspflichtiges Gerät: Nur auf Rezept. Vorsicht: Laut Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem approbierten Arzt oder Zahnarzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

Kanadische Lizenzfreistellung: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte nach kanadischem Recht lizenziert sein können.

Alle Rechte vorbehalten. Southern Implants®, der Southern Implants®-Logotyp und alle anderen in diesem Dokument verwendeten Marken sind, sofern nicht anders angegeben oder im Einzelfall aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Southern Implants®. Die Produktbilder in diesem Dokument dienen nur zur Veranschaulichung und stellen das Produkt nicht unbedingt maßstabsgetreu dar. Es liegt in der Verantwortung des Kliniklers, die Symbole auf der Verpackung des verwendeten Produkts zu überprüfen.

Descrição

O implante hex externo é um implante auto-roscante feito de titânio de grau 4 comercialmente puro (UTS $\geq$ 900 MPa). Os implantes estão disponíveis com uma forma de corpo cônica ou de parede paralela. Todos os implantes têm uma superfície rugosa até ao colo, com exceção dos implantes da versão MSc, que têm uma superfície MSc de 3 mm coronalmente. A superfície rugosa tem um valor Sa de 1,4 micron. O implante Hex externo também está disponível no design Co-Axis® de plataforma angulada. Com uma plataforma incorporada com ângulo de 12°, 24° e 36°, este desenho permite a inclinação do implante sem comprometer o ângulo de afloramento da restauração.

Utilização pretendida

Este sistema destina-se a auxiliar no tratamento de pacientes parcial ou totalmente edêntulos elegíveis para a colocação de um ou mais implantes dentários como meio de fixação de uma coroa unitária permanente ou amovível, de uma prótese dentária parcial ou de uma arcada completa no maxilar superior ou inferior.

Estes dispositivos destinam-se a ser colocados num local pré-perfurado no osso alveolar, onde se osseointegram (formam uma ligação rígida com o osso) e onde é fixado um pilar para a retenção de uma prótese.

Os dispositivos permitem a restauração protética imediata ou retardada com base na avaliação da elegibilidade do paciente por parte do utilizador.

Os componentes do sistema são classificados como dispositivos médicos e destinam-se a utilização única num único paciente.

Indicações de utilização

Os implantes Hex Externo da Southern Implants destinam-se à colocação cirúrgica no maxilar superior ou inferior para fornecer um meio de fixação protética de coroas, pontes ou sobredentaduras utilizando carga retardada ou imediata. Os implantes Hex Externo da Southern Implants destinam-se a uma função imediata quando se consegue uma boa estabilidade primária com uma carga oclusal adequada.

Utilizador pretendido

Cirurgiões maxilo-facial, dentistas gerais, ortodontistas, periodontistas, prostodontistas e outros utilizadores de implantes com formação e experiência adequadas.

Ambiente pretendido

Os dispositivos destinam-se a ser utilizados num ambiente clínico, como um bloco operatório ou uma sala de consulta de um dentista.

População pretendida de pacientes

Este dispositivo é usado na restauração dentária de pacientes parcialmente ou totalmente desdentados na mandíbula superior ou inferior. As restaurações podem ser constituídas por dentes únicos, pontes parciais ou totais, podendo ser fixas ou removíveis.

Informações de compatibilidade

Os implantes da Southern Implants devem ser restaurados com os componentes Southern Implants. Utilizar componentes que correspondam ao tipo de conexão e à plataforma protética ao restaurar os implantes Hex externos. Para mais informações, consultar os catálogos de produtos (CAT-2020 & CAT-2095).

Tabela A - Gama de implantes Hex externo

Código do item	MSc	Cónico/Cilíndrico	Diâmetro do implante (mm)	Comprimentos dos implantes (mm)
Implantes regulares				
Direto				
IP	✓	Cónico	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Cilíndrico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Cónico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

IBS	✓	Cilíndrico	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cilíndrico	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBT	✓	Cónico	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Cilíndrico	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Cónico	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Cónico	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Cónico	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Cónico	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Cónico	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Cónico	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Implantes				
Direto				
IV-EX30-37		Cónico	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Cónico	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Cónico	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Cónico	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Cónico	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Cónico	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Cónico	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Cónico	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Cónico	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Cónico	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Cónico	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Cónico	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Cónico	Ø3,0 – Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Cónico	Ø3,5 – Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Cónico	Ø4,0 – Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Cónico	Ø5,2 – Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
Implantes hex externos de acionamento interno				
INPI		Cilíndrico	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Cilíndrico	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Cónico	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cilíndrico	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Cónico	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cilíndrico	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Cónico	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

NOTA: Nem todos os produtos estão autorizados a ser vendidos em todos os países.

Benefícios clínicos

Os benefícios clínicos da terapia com implantes dentários incluem a melhoria da função mastigatória, da fala, da estética e do bem-estar psicológico do paciente. Através deste procedimento, os doentes podem esperar ter seus dentes perdidos substituídos e/ou coroas restauradas.

Armazenamento, limpeza e esterilização

O componente é fornecido estéril (esterilizado por irradiação gama) e destina-se a uma utilização única antes do prazo de validade (ver rótulo da embalagem). A esterilização é garantida, salvo se o contentor ou vedante estejam danificados ou abertos. Se a embalagem estiver danificada, não utilizar o produto e contactar o seu representante da Southern ou devolver à Southern Implants®. Os dispositivos devem ser armazenados num local seco à temperatura ambiente e não expostos à luz solar directa. O armazenamento incorrecto pode influenciar as características do dispositivo. Não reutilizar os componentes indicados para uma única utilização. A reutilização destes componentes pode resultar em:

- danos na superfície ou dimensões críticas, que podem resultar na degradação do desempenho e da compatibilidade.
- adiciona o risco de infeção e contaminação entre doentes se itens descartáveis forem reutilizados.

A Southern Implants® não aceita qualquer responsabilidade por complicações associadas a componentes reutilizados de utilização única.

Contra-indicações

As contra-indicações para a terapia com implantes incluem:

- pacientes clinicamente não aptos para procedimentos cirúrgicos orais.
- onde um número inadequado de implantes pode ser colocado, limitando o suporte funcional da prótese.
- pacientes com idade inferior a 18 anos.
- pacientes com má qualidade óssea.
- pacientes com doenças sanguíneas.
- presença de infecção no local do implante.
- pacientes com problemas vasculares.
- pacientes com diabetes não controlada.
- pacientes com dependência de drogas ou álcool.
- pacientes submetidos a terapia crónica com esteróides em doses elevadas.
- pacientes submetidos a terapia anti-coagulante.
- pacientes com doença óssea metabólica.
- pacientes submetidos a tratamento de radioterapia.
- pacientes que são alérgicos ou têm hipersensibilidade ao titânio puro ou a liga de titânio (Ti6Al4V), ouro, paládio, platina, irídio ou polietereetercetona (PEEK).

Avisos e precauções

ESTAS INSTRUÇÕES NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO UM SUBSTITUTO DE UMA FORMAÇÃO ADEQUADA.

- Para a utilização segura e eficaz de implantes dentários, sugere-se que seja empreendida formação especializada, incluindo formação prática para aprender a técnica adequada, requisitos biomecânicos e avaliações radiográficas.
- Os produtos devem ser protegidos contra a aspiração quando manuseados por via intraoral. A aspiração de produtos pode levar a infeção ou a lesões físicas indesejadas.

A responsabilidade da seleção adequada dos pacientes, formação adequada, experiência na colocação de implantes e de facultar as informações apropriadas para o consentimento informado cabe ao médico. A técnica inadequada pode resultar na falha do implante, danos aos nervos/vasos e/ou perda do osso de suporte. A falha dos implantes aumenta quando os implantes são colocados no osso irradiado, uma vez que a radioterapia pode resultar em fibrose progressiva dos vasos e tecidos moles, levando a uma diminuição da capacidade de cicatrização.

É importante estar atento e evitar danos a estruturas vitais, tais como nervos, veias e artérias. As lesões de estruturas anatómicas vitais podem causar sérias complicações, tais como lesões oculares, lesões nervosas e hemorragias excessivas. É essencial para proteger o nervo infraorbital. A falha na identificação das medições reais em relação aos dados radiográficos pode levar a complicações.

Utilizadores de implantes novos e experientes devem fazer formação antes de utilizar um novo sistema ou tentar realizar um novo método de tratamento. Tomar especial cuidado no tratamento de pacientes que têm factores locais ou sistémicos que podem afectar a cicatrização do osso e tecido mole (ou seja, higiene oral deficiente, diabetes descompensada, estão em terapia com esteróides, fumadores, infeção no osso próximo e pacientes que fizeram radioterapia orofacial).

A triagem completa de candidatos a implantes potenciais deve ser realizada, incluindo:

- um histórico médico e odontológico extensivo.
- inspecção visual e radiológica para determinar dimensões ósseas adequadas, marcos anatómicos, condições oclusais e saúde periodontal.
- bruxismo e relações intermaxilares desfavoráveis devem ser tomadas em conta.
- é essencial que haja planeamento préoperatório adequado, com uma boa abordagem de equipa entre cirurgiões com formação adequada, dentistas restauradores e técnicos de laboratório para que o tratamento com implantes seja bem sucedido.
- minimizar o trauma no tecido hospedeiro aumenta o potencial de sucesso da integração óssea.
- não deve ser realizada electrocirurgia perto dos implantes metálicos pois eles são condutores.

Se o dispositivo não funcionar como previsto, o facto deve ser comunicado ao fabricante do dispositivo. As informações de contacto do fabricante deste dispositivo para comunicar uma alteração no desempenho são: sicomplaints@southernimplants.com.

Efeitos secundários

Os efeitos secundários da utilização do sistema não são diferentes dos da terapia com implantes dentários. Os possíveis efeitos secundários da terapia com implantes incluem:

- dor
- inchaço
- dificuldades fonéticas
- inflamação gengival

Os sintomas menos comuns mas mais persistentes incluem, mas não se limitam a:

- reação(ões) alérgica(s) ao material do implante e/ou do pilar
- fratura do implante e/ou do pilar
- afrouxamento do parafuso do pilar e/ou do parafuso de fixação
- infeção que exija a revisão do implante dentário
- lesões nervosas que resultam em fraqueza permanente, dormência ou dor
- respostas histológicas com possível envolvimento de macrófagos e/ou fibroblastos
- formação de êmbolos de gordura
- afrouxamento do implante que requer cirurgia de revisão
- perfuração do seio maxilar
- perfuração das placas labial e lingual
- perda óssea que pode resultar na revisão ou remoção do implante.

Precaução: manter o protocolo de esterilidade

Os implantes são embalados da seguinte forma:

1. Uma embalagem exterior constituída por uma caixa rígida e transparente que funciona como proteção para a embalagem interior.
2. A embalagem interior consiste numa embalagem blister (base em plástico bolha de ar transparente com uma aba de abertura de TYVEK).
3. Dentro da embalagem interna existe um tubo oco que contém um implante suspenso de um anel de titânio, isto assegura que o implante nunca toca no interior do tubo de plástico.
4. As informações de rotulagem estão localizadas na superfície da aba de abertura e no exterior da caixa rígida.

Deve ter-se o cuidado de manter a esterilidade do implante através da abertura adequada da embalagem e manuseamento do implante.

1. Abrir a embalagem do implante no campo não estéril, com luvas não estéreis, rasgar a etiqueta de endereço para abrir a caixa.
2. Com luvas não esterilizadas, remover a embalagem blister interior. Não colocar a caixa de plástico ou o fecho da embalagem blister no campo esterilizado. O conteúdo desta embalagem interior é esterilizado.
3. A embalagem blister selada deve ser aberta por um assistente (com luvas não esterilizadas): remover a tampa TYVEK e deixar cair ou colocar o tubo esterilizado no campo esterilizado, abrir a tampa do tubo e fixar a ferramenta de colocação do implante ao implante e remover cuidadosamente do tubo esterilizado. Não tocar no implante esterilizado.

Outros componentes esterilizados são embalados num saco de esterilização ou embalagem blister com uma aba de abertura. As informações de rotulagem estão localizadas na metade inferior do saco, dentro da embalagem ou na superfície da aba de abertura. A esterilidade está garantida, a menos que o saco esteja danificado ou aberto. Os componentes não esterilizados são fornecidos limpos num saco ou embalagem blister com uma aba de abertura. As informações de rotulagem estão localizadas na metade inferior do saco ou na superfície da aba de abertura.

Aviso sobre incidentes graves

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante do dispositivo e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

As informações de contato do fabricante deste dispositivo para relatar um incidente sério são as seguintes: sicomplaints@southernimplants.com.

Materiais

Tipo de material Titânio comercialmente puro (grau 4, ASTM F67 e ISO5832-2, UTS ≥ 900 MPa)

Eliminação

Eliminação do dispositivo e da sua embalagem: seguir os regulamentos locais e requisitos ambientais levando em conta diferentes níveis de contaminação. Ao descartar itens gastos, tome cuidado com brocas e instrumentos afiados. EPI suficiente deve ser utilizado em todos os momentos.

Segurança RM

Os ensaios não clínicos demonstraram que os implantes dentários, os pilares metálicos e os parafusos protéticos da Southern Implants® são condicionados por RM.

Um paciente com estes dispositivos pode ser digitalizado em segurança num sistema de RM que satisfaça as seguintes condições:

- campo magnético estático de 1,5 Tesla e 3,0 Tesla apenas.
- campo magnético de gradiente espacial máximo de 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- o sistema de RM máximo comunicou a SAR correspondente ao modo de funcionamento normal para todos os pontos de referência (SAR da cabeça de 3,2 W/kg para o ponto de referência da cabeça, 2 W/kg para todo o corpo e SAR de corpo parcial adequada para outros pontos de referência). Para a obtenção de imagens de pontos de referência acima do tórax, um tempo de exame contínuo de 15 minutos exigirá um atraso de arrefecimento de pelo menos 5 minutos.
- nos ensaios não clínicos, o artefacto de imagem causado pelo dispositivo estende-se aproximadamente 20 mm dos implantes dentários, pilares e parafusos protéticos da Southern Implants, quando a imagem é obtida com uma sequência de impulsos eco gradiente e um sistema de RMN de 3,0 Tesla.

As restaurações removíveis devem ser retiradas antes da digitalização, tal como se faz com os relógios, jóias, etc.

Se o rótulo do produto não contiver o símbolo de RM, é de notar que este dispositivo não foi avaliado quanto à segurança e compatibilidade no ambiente de RM.

Resumo da segurança e do desempenho clínico (SSCP)

Conforme exigido pelo Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (MDR; EU2017/745), está disponível um Resumo da segurança e do desempenho clínico (SSCP) para leitura relativamente às gamas de produtos da Southern Implants®.

O SSCP relevante pode ser acedido em <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

NOTA: o sítio web acima referido estará disponível aquando do lançamento da Base de Dados Europeia sobre Dispositivos Médicos (EUDAMED).

Exclusão de responsabilidade

Este produto faz parte da gama de produtos da Southern Implants® e deve ser utilizado apenas com os produtos originais associados e de acordo com as recomendações indicadas nos catálogos individuais dos produtos. O utilizador deste produto tem de estudar o desenvolvimento da linha de produtos da Southern Implants® e assumir total responsabilidade pelas indicações e utilização corretas deste produto. A Southern Implants® não assume responsabilidade por danos devidos a utilização incorrecta. Tenha em atenção que alguns produtos da Southern Implants® podem não ser aprovados ou lançados para venda em todos os mercados.

UDI básico

Produto	Número UDI básico
IDU Básico para Implantes Dentários Gerais	6009544038699H

Literatura e catálogos relacionados

CAT-2020 - Catálogo de produtos de implantes Hex externo

CAT-2095 - Catálogo de produtos para implantes INVERTA® de Hex externo

Símbolos e avisos

											
Fabricante: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, África do Sul. Tel: +27 12 667 1046	Marca CE 2797	Dispositivo de prescrição*	Esterilizado por irradiação	Não esterilizado	Data de validade (mm-aa)	Não reutilizar	Não reesterilizar	Número de catálogo	Código de lote	Dispositivo médico	Representante autorizado na Comunidade Europeia
											
Representante autorizado para a Suíça	Data de fabrico	Ressonância magnética condicional	Seguro para ressonância magnética	Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora no interior	Sistema de barreira esterilizada única	Consulte instruções de utilização	Cuidado	Não expor à luz solar	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		

* Dispositivo de prescrição: Apenas com receita. Cuidado: A Lei Federal restringe este dispositivo à venda por ou com ordem de um médico ou dentista licenciado.

Isenção de licença do Canadá: É favor notar que nem todos os produtos podem ter sido licenciados de acordo com a lei canadiana.

Todos os direitos reservados. A Southern Implants®, o logótipo da Southern Implants® e todas as outras marcas registadas utilizadas neste documento são, se nada mais for declarado ou for evidente a partir do contexto num determinado caso, marcas registadas da Southern Implants®. As imagens do produto neste documento são apenas para fins ilustrativos e não representam necessariamente o produto com precisão à escala. É da responsabilidade do médico inspecionar os símbolos que aparecem na embalagem do produto que está a ser utilizado.

Περιγραφή

Το εξωτερικό εξαγωνο εμφύτευμα είναι ένα αυτοκόλλητο εμφύτευμα από εμπορικά καθαρό τιτάνιο βαθμού 4 (UTS $\geq$ 900 MPa). Τα εμφυτεύματα διατίθενται είτε με κωνικό είτε με παράλληλο τοίχωμα. Όλα τα εμφυτεύματα είναι επιφανειακά εξογκωμένα μέχρι το κολάρο, με εξαίρεση τα εμφυτεύματα της έκδοσης MSc, τα οποία έχουν επιφάνεια MSc 3 mm στεφανιαία. Η τραχιά επιφάνεια έχει τιμή Sa 1,4 μικρά. Το εξωτερικό εξαγωνο εμφύτευμα διατίθεται επίσης με τη γωνιακή πλατφόρμα Co-Axis®. Με ενσωματωμένη γωνία πλατφόρμας 12°, 24° και 36°, αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την κλίση του εμφυτεύματος χωρίς να διακυβεύεται η γωνία ανάδυσσης της αποκατάστασης.

Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα αυτό προορίζεται για τη θεραπεία ασθενών με μερικώς ή πλήρως χωρίς οδοντοστοιχία που είναι επιλέξιμοι ως προς την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων οδοντικών εμφυτευμάτων ως μέσο στερέωσης μόνιμης ή αφαιρούμενης μονής στεφάνης, μερικής ή ολικής οδοντικής πρόθεσης στην άνω ή κάτω γνάθο.

Αυτές οι συσκευές προορίζονται να τοποθετούνται σε μια προ-διατηρημένη θέση στο φατνιακό οστό, όπου οστεοενσωματώνονται (σχηματίζουν μια άκαμπτη σύνδεση με το οστό) και προσαρτάται ένα κολόβωμα για τη συγκράτηση μιας πρόθεσης.

Οι συσκευές επιτρέπουν την άμεση ή καθυστερημένη προσθετική αποκατάσταση με βάση την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του ασθενούς από τον χρήστη.

Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος ταξινομούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και προορίζονται για εφάπαξ χρήση σε έναν μόνο ασθενή.

Οδηγίες χρήσης

Τα εξωτερικά εξαγωνικά εμφυτεύματα της Southern Implants προορίζονται για χειρουργική τοποθέτηση στην άνω ή κάτω γνάθο για την προσθετική στερέωση στεφανών, γεφυρών ή επένθετων οδοντοστοιχιών με καθυστερημένη ή άμεση φόρτιση. Τα εξωτερικά εξαγωνικά εμφυτεύματα της Southern Implants προορίζονται για άμεση λειτουργία, όταν επιτυγχάνεται καλή πρωτογενής σταθερότητα με κατάλληλη αποφρακτική φόρτιση.

Προβλεπόμενος χρήστης

Γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, γενικοί οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, περιοδοντολόγοι, οδοντοπροσθετικοί και άλλοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι χρήστες εμφυτευμάτων.

Προβλεπόμενο περιβάλλον

Οι συσκευές προορίζονται για χρήση σε κλινικό περιβάλλον, όπως ένα χειρουργείο ή ένα ιατρείο οδοντιάτρων.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική αποκατάσταση μερικώς ή πλήρως οδοντωτών ασθενών στην άνω ή κάτω γνάθο. Οι αποκαταστάσεις μπορεί να αποτελούνται από μεμονωμένα δόντια, μερικές ή πλήρεις γέφυρες και μπορεί να είναι σταθερές ή αφαιρούμενες.

Πληροφορίες συμβατότητας

Τα εμφυτεύματα της Southern Implants πρέπει να αποκαθίστανται αποκλειστικά με εξαρτήματα της. Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα που αντιστοιχούν στον τύπο σύνδεσης και στην προσθετική πλατφόρμα κατά την αποκατάσταση των εξωτερικών εξαγωνικών εμφυτευμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους καταλόγους προϊόντων (CAT-2020 & CAT-2095).

Πίνακας Α - Εύρος εξωτερικών εξαγωνικών εμφυτευμάτων

Κωδικός προϊόντος	MSc	Κωνικό/κυλινδρικό	Διάμετρος εμφυτεύματος (mm)	Μήκη εμφυτευμάτων (mm)
Συνήθη εμφυτεύματα				
Ευθεία				
IP	✓	Κωνικό	Ø3,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
IBN		Κυλινδρικό	Ø3,25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18

IBNT	✓	Κωνικό	Ø3,25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBS	✓	Κυλινδρικό	Ø3,75	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Κυλινδρικό	Ø4,0	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
IBT	✓	Κωνικό	Ø4,0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
BA	✓	Κυλινδρικό	Ø5,0	6/ 7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Κωνικό	Ø5,0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Κωνικό	Ø6,0	6/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Κωνικό	Ø3,25	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Κωνικό	Ø5,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Κωνικό	Ø5,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Κωνικό	Ø5,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Κωνικό	Ø5,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Κωνικό	Ø6,0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Κωνικό	Ø6,0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Εμφυτεύματα				
Ευθεία				
IV-EX30-37		Κωνικό	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Κωνικό	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Κωνικό	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11.5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Κωνικό	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Κωνικό	Ø3,0 – Ø3,7	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Κωνικό	Ø3,5 – Ø4,5	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Κωνικό	Ø4,0 – Ø5,0	10/ 11.5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Κωνικό	Ø5,2 – Ø6,0	10/ 11.5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Κωνικό	Ø3,0 – Ø3,7	11.5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Κωνικό	Ø3,5 – Ø4,5	11.5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Κωνικό	Ø4,0 – Ø5,0	11.5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Κωνικό	Ø5,2 – Ø6,0	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Κωνικό	Ø3,0 – Ø3,7	11.5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Κωνικό	Ø3,5 – Ø4,5	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Κωνικό	Ø4,0 – Ø5,0	11.5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Κωνικό	Ø5,2 – Ø6,0	11.5/ 13/ 15/ 18
Εξωτερικά εξαγωνικά εμφυτεύματα εσωτερικής κίνησης				
INPI		Κυλινδρικό	Ø3,3	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
IBI		Κυλινδρικό	Ø3,75	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Κωνικό	Ø4,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BAI		Κυλινδρικό	Ø5,0	6/ 7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BATI		Κωνικό	Ø5,0	10/ 11.5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Κυλινδρικό	Ø6,0	7/ 8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15
BBBTI		Κωνικό	Ø6,0	8.5/ 10/ 11.5/ 13/ 15/ 18

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η πώληση όλων των προϊόντων σε όλες τις χώρες.

Κλινικά οφέλη

Τα κλινικά οφέλη της θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της λειτουργίας της μάσησης, της ομιλίας, της αισθητικής και της ψυχολογικής ευεξίας του ασθενούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν την αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών τους και/ή την αποκατάσταση των στεφανών τους.

Αποθήκευση, καθαρισμός και αποστείρωση

Το συστατικό παρέχεται αποστειρωμένο (αποστειρωμένο με ακτινοβολία γάμμα) και προορίζεται για εφάπαξ χρήση πριν από την ημερομηνία λήξης (βλέπε ετικέτα συσκευασίας). Η αποστείρωση εξασφαλίζεται εκτός εάν ο περιέκτης ή η σφραγίδα υποστεί ζημιά ή ανοιχθεί. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Southern ή επιστρέψτε το στη Southern Implants®. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου και να μην εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. Η εσφαλμένη αποθήκευση μπορεί να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Μην επαναχρησιμοποιείτε εξαρτήματα που ενδείκνυνται μόνο για εφάπαξ χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:

- ζημιά στην επιφάνεια ή στις κρίσιμες διαστάσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσης και της συμβατότητας.
- προσθέτει τον κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης και μόλυνσης μεταξύ ασθενών, εάν επαναχρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μίας χρήσης.

Η Southern Implants® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιπλοκές που σχετίζονται με επαναχρησιμοποιημένα εξαρτήματα μίας χρήσης.

Αντενδείξεις

Οι αντενδείξεις για τη θεραπεία με εμφυτεύματα περιλαμβάνουν:

- ασθενείς ιατρικά ακατάλληλοι για χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα.
- όπου μπορεί να τοποθετηθεί ανεπαρκής αριθμός εμφυτευμάτων, περιορίζοντας τη λειτουργική υποστήριξη της πρόθεσης.
- ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.
- ασθενείς με κακή ποιότητα οστών.
- ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές.
- παρουσία λοίμωξης στο σημείο του εμφυτεύματος.
- ασθενείς με αγγειακή βλάβη.
- ασθενείς με μη ελεγχόμενο διαβήτη.
- ασθενείς με εξαρτήσεις από ναρκωτικά ή αλκοόλ.
- ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια θεραπεία με υψηλές δόσεις στεροειδών.
- ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιπηκτική θεραπεία.
- ασθενείς με μεταβολική νόσο των οστών.
- ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
- ασθενείς με αλλεργία ή υπερευαισθησία σε καθαρό τιτάνιο, κράμα τιτανίου (Ti6Al4V), χρυσό, παλλάδιο, κετόνη πολυαιθερικού αιθέρα (PEEK) ή ιρίδιο.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

- Για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων προτείνεται έντονα η πραγματοποίηση εξειδικευμένης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής κατάρτισης για την εκμάθηση της σωστής τεχνικής, των εμβιομηχανικών απαιτήσεων και των ακτινογραφικών αξιολογήσεων.
- Τα προϊόντα πρέπει να προστατεύονται από αναρρόφηση όταν χειρίζονται ενδοστοματικά. Η αναρρόφηση προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση ή απρογραμμάτιστο σωματικό τραυματισμό.

Η ευθύνη για τη σωστή επιλογή των ασθενών, την επαρκή εκπαίδευση, την εμπειρία στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση ανήκει στον ιατρό. Η ακατάλληλη τεχνική μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του εμφυτεύματος, βλάβη των νεύρων/αγγείων και/ή απώλεια του οστού στήριξης. Η αποτυχία των εμφυτευμάτων αυξάνεται όταν τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σε οστό που έχει ακτινοβοληθεί, καθώς η ακτινοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική ίνωση των αγγείων και των μαλακών μορίων, οδηγώντας σε μειωμένη ικανότητα εππούλωσης.

Είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι και να αποφεύγετε βλάβες σε ζωτικές δομές όπως νεύρα, φλέβες και αρτηρίες. Οι τραυματισμοί σε ζωτικές ανατομικές δομές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως τραυματισμό του

οφθαλμού, βλάβη των νεύρων και υπερβολική αιμορραγία. Είναι σημαντικό να προστατεύεται το υποκόγχιο νεύρο. Η μη αναγνώριση των πραγματικών μετρήσεων σε σχέση με τα ακτινογραφικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές.

Οι νέοι και έμπειροι χρήστες εμφυτευμάτων θα πρέπει να εκπαιδεύονται προτού χρησιμοποιήσουν ένα νέο σύστημα ή επιχειρήσουν να κάνουν μια νέα μέθοδο θεραπείας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη θεραπεία ασθενών που έχουν τοπικούς ή συστηματικούς παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επούλωση του οστού και των μαλακών μορίων (π.χ. κακή στοματική υγιεινή, μη ελεγχόμενος διαβήτης, λήψη στεροειδών, καπνιστές, λοίμωξη στο κοντινό οστό και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στοματοπροσωπικής περιοχής).

Πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των υποψηφίων ασθενών για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- ολοκληρωμένο ιατρικό και οδοντικό ιστορικό.
- οπτική και ακτινολογική επιθεώρηση για τον καθορισμό επαρκών διαστάσεων οστού, ανατομικών ορόσημων, συνθηκών απόφραξης και περιοδοντική υγεία.
- πρέπει να ληφθούν υπόψη ο βρουξισμός και οι δυσμενείς σχέσεις με τη σιαγόνα.
- ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός με μια καλή ομαδική προσέγγιση μεταξύ καλά εκπαιδευμένων χειρουργών, οδοντιάτρων αποκατάστασης και τεχνικών εργαστηρίου είναι απαραίτητος για την επιτυχή θεραπεία εμφυτευμάτων.
- η ελαχιστοποίηση του τραύματος στον ιστό-ξενιστή αυξάνει το ενδεχόμενο επιτυχούς οστεοενσωμάτωσης.
- δεν πρέπει να επιχειρηθεί ηλεκτροχειρουργική γύρω από μεταλλικά εμφυτεύματα καθώς είναι αγωγίμα.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται, αυτό πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή της συσκευής. Τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή αυτής της συσκευής για την αναφορά μιας αλλαγής στις επιδόσεις είναι: sicomplaints@southernimplants.com.

Παρενέργειες

Οι παρενέργειες από τη χρήση του συστήματος δε διαφέρουν από εκείνες της θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα. Οι πιθανές παρενέργειες της θεραπείας με εμφυτεύματα περιλαμβάνουν:

- πόνος
- πρήξιμο
- φωνητικές δυσκολίες
- φλεγμονή των ούλων

Τα λιγότερο συνηθισμένα αλλά πιο επίμονα συμπτώματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

- αλλεργική αντίδραση(ες) στο εμφύτευμα και/ή στο υλικό των κολοβωμάτων
- θραύση του εμφυτεύματος ή/και του κολοβώματος
- χαλάρωση της βίδας του κολοβώματος ή/και της βίδας συγκράτησης
- μόλυνση που απαιτεί αναθεώρηση του οδοντικού εμφυτεύματος
- νευρική βλάβη με αποτέλεσμα μόνιμη αδυναμία, μούδιασμα ή πόνο
- ιστολογικές αντιδράσεις με πιθανή συμμετοχή μακροφάγων ή/και ινοβλαστών
- σχηματισμός εμβόλων λίπους
- χαλάρωση του εμφυτεύματος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης
- διάτρηση του γναθιαίου κόλπου
- διάτρηση της χειλικής και της γλωσσικής πλάκας
- απώλεια οστού που μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση ή αφαίρεση του εμφυτεύματος.

Προφύλαξη: διατήρηση του πρωτοκόλλου στειρότητας

Τα εμφυτεύματα συσκευάζονται ως εξής:

1. Εξωτερική συσκευασία που αποτελείται από ένα άκαμπτο, διαφανές κουτί το οποίο λειτουργεί ως προστασία για την εσωτερική συσκευασία.
2. Η εσωτερική συσκευασία αποτελείται από μια κυψέλη (διαφανής πλαστική βάση κυψέλης με καπάκι TYVEK "peel-back").

3. Μέσα στην εσωτερική συσκευασία υπάρχει ένας κοίλος σωλήνας που περιέχει ένα εμφύτευμα αναρτημένο σε έναν δακτύλιο τιτανίου, γεγονός που εξασφαλίζει ότι το εμφύτευμα δεν αγγίζει ποτέ το εσωτερικό του πλαστικού σωλήνα.
4. Οι πληροφορίες επισήμανσης βρίσκονται στην επιφάνεια του αποσπώμενου καπακιού και στο εξωτερικό του άκαμπτου κουτιού.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση της αποστείρωσης του εμφυτεύματος με το σωστό άνοιγμα της συσκευασίας και τον χειρισμό του εμφυτεύματος.

1. Ανοίξτε τη συσκευασία του εμφυτεύματος στο μη αποστειρωμένο πεδίο, με μη αποστειρωμένα γάντια, σκίστε την ετικέτα διεύθυνσης για να ανοίξετε το κουτί.
2. Με μη αποστειρωμένα γάντια, αφαιρέστε την εσωτερική συσκευασία κυψέλης. Μην τοποθετείτε το πλαστικό κουτί ή το καπάκι της κυψέλης πάνω στο αποστειρωμένο πεδίο. Το περιεχόμενο αυτής της εσωτερικής συσκευασίας είναι αποστειρωμένο.
3. Η σφραγισμένη κυψέλη πρέπει να ανοιχθεί από έναν βοηθό (με μη αποστειρωμένα γάντια): αφαιρέστε το καπάκι του TYVEK και ρίξτε ή τοποθετήστε τον αποστειρωμένο σωλήνα στο αποστειρωμένο πεδίο, ανοίξτε το καπάκι του σωλήνα και τοποθετήστε το εργαλείο τοποθέτησης του εμφυτεύματος στο εμφύτευμα και αφαιρέστε το προσεκτικά από τον αποστειρωμένο σωλήνα. Μην αγγίζετε το αποστειρωμένο εμφύτευμα.

Άλλα αποστειρωμένα συστατικά συσκευάζονται σε σακουλάκι ή βάση κυψέλης με καπάκι "peel-back". Οι πληροφορίες επισήμανσης βρίσκονται στο κάτω μέρος της σακούλας, στο εσωτερικό της συσκευασίας ή στην επιφάνεια του καπακιού που αφαιρείται. Η αποστείρωση εξασφαλίζεται εκτός εάν το σακουλάκι υποστεί ζημιά ή ανοιχθεί. Τα μη αποστειρωμένα συστατικά παρέχονται καθαρά αλλά όχι αποστειρωμένα σε σακουλάκι ή βάση κυψέλης με καπάκι που αποκολλάται. Οι πληροφορίες επισήμανσης βρίσκονται στο κάτω μισό της σακούλας ή στην επιφάνεια του καπακιού που αποκολλάται.

Ειδοποίηση σχετικά με σοβαρά περιστατικά

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή της συσκευής και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή αυτής της συσκευής για την αναφορά ενός σοβαρού περιστατικού έχουν ως εξής: sicomplaints@southernimplants.com.

Υλικά

Τύπος υλικού Εμπορικά καθαρό τιτάνιο (βαθμός 4, ASTM F67 και ISO5832-2, UTS $\geq$ 900 MPa)

Απόρριψη

Απόρριψη της συσκευής και της συσκευασίας της: ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα μόλυνσης. Κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων αντικειμένων, λάβετε υπόψη αιχμηρά τρυπάνια και όργανα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε επαρκή PPE.

Ασφάλεια Μαγνητικού Συντονισμού(MR)

Μη κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα Southern Implants®, τα μεταλλικά κολοβώματα και οι προσθετικές βίδες είναι συμβατά με MR.

Ένας ασθενής με αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε ένα σύστημα μαγνητικού συντονισμού (MR) που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla και 3,0 Tesla μόνο.
- μέγιστο μαγνητικό πεδίο χωρικής κλίσης 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- το μέγιστο σύστημα MR ανέφερε SAR που αντιστοιχεί στην κανονική λειτουργία λειτουργίας για όλα τα σημεία αναφοράς (SAR κεφαλής 3,2 W/kg για το σημείο αναφοράς κεφαλής, 2 W/kg για ολόκληρο το σώμα και κατάλληλο μερικό SAR σώματος για άλλα σημεία αναφοράς). Για την απεικόνιση σημείων πάνω από τον θώρακα, ένας συνεχής χρόνος σάρωσης 15 λεπτών απαιτεί καθυστέρηση ψύξης τουλάχιστον 5 λεπτών.

- στις μη κλινικές δοκιμές, η εικόνα που προκαλείται από τη συσκευή εκτείνεται περίπου 20 mm από τα οδοντικά εμφυτεύματα, τα κολόβωμα και τις προσθετικές βίδες της Southern Implants, κατά την απεικόνιση με παλμική ακολουθία βαθμωτής ηχούς και σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 3,0 Tesla.

Οι αφαιρούμενες αποκαταστάσεις θα πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη σάρωση, όπως γίνεται για τα ρολόγια, τα κοσμήματα κ.λπ.

Εάν δεν υπάρχει σύμβολο MR στην ετικέτα του προϊόντος, λάβετε υπόψη ότι η συσκευή αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και τη συμβατότητα σε περιβάλλον MR.

Σύνοψη της Ασφάλειας και των Κλινικών Επιδόσεων (SSCP)

Όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Ιατρικά Συσκευάσματα (MDR: EU2017/745), μια Περίληψη Ασφάλειας και Κλινικών Επιδόσεων (SSCP) είναι διαθέσιμη για ανάγνωση όσον αφορά τις σειρές προϊόντων Southern Implants®.

Η σχετική SSCP είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο ανωτέρω δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος μετά την έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED).

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν προϊόν αποτελεί μέρος της σειράς προϊόντων Southern Implants® και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα σχετικά πρωτότυπα προϊόντα και σύμφωνα με τις συστάσεις που αναφέρονται στους επιμέρους καταλόγους προϊόντων. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος οφείλει να μελετήσει την εξέλιξη της σειράς προϊόντων Southern Implants® και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις σωστές ενδείξεις και τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η Southern Implants® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση. Σημειώστε ότι ορισμένα προϊόντα της Southern Implants® ενδέχεται να μην έχουν εγκριθεί ή κυκλοφορήσει προς πώληση σε όλες τις αγορές.

Βασικό UDI

Προϊόν	Βασικός αριθμός UDI
Βασικό-UDI για γενικά οδοντικά εμφυτεύματα	6009544038699H

Σχετική βιβλιογραφία και κατάλογοι

CAT-2020 - Κατάλογος προϊόντων για εξωτερικά εξαγωνικά εμφυτεύματα

CAT-2095 - Εξωτερικό εξαγωνικό INVERTA® Κατάλογος προϊόντων εμφυτευμάτων

Σύμβολα και προειδοποιήσεις

											
Κατασκευαστής : Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, Νότια Αφρική. Τηλέφωνο: +27 12 667 1046	Σήμα CE 2797	Ιατροτεχνολογικό πρόϊόν/συνογόρ φησης*	Αποστειρωμέν ο με ακτινοβολία	Μη αποστειρωμέν ο	Ημερομηνί α χρήσης (μμ-εε)	Να μην επαναχρησιμοποιη τε	Μην επαναστεριώσε τε	Αριθμός καταλόγου	Κωδικός παρτίδας	Ιατρική συσκευή	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
											
Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την Ελλάδα	Ημερομηνία κατασκευής	Συμβατό μαγνητικό συντονισμό	Ασφαλές για μαγνητικό συντονισμό	Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού με εσωτερική προστατευτική συσκευασία	Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού	Συμβουλευτείτε ε τις οδηγίες χρήσης	Προσοχή	Να διατηρείται μακριά από το ηλιακό φως	Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη		

* Συνταγογραφούμενο τεχνολογικό προϊόν: Χορηγείται μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο κατόπιν εντολής εξουσιοδοτημένου ιατρού ή οδοντίατρου.

Εξαιρεση άδειας Καναδά: Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης για όλα τα προϊόντα σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία.

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Τα Southern Implants®, το λογότυπο Southern Implants® και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αποτελούν, εάν δεν αναφέρεται κάτι άλλο ή δεν προκύπτει από το πλαίσιο σε συγκεκριμένη περίπτωση, εμπορικά σήματα της Southern Implants®. Οι εικόνες προϊόντος σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα το προϊόν με ακρίβεια στην κλίμακα. Είναι ευθύνη του κλινικού ιατρού να ελέγχει τα σύμβολα που αναγράφονται στη συσκευασία του χρησιμοποιούμενου προϊόντος.

Beskrivning

Externa sexkant implantatet är ett självgående implantat tillverkat av kommersiellt rent grad 4 titan (UTS $\geq$ 900 MPa). Implantat finns med antingen en avsmalnande eller parallellväggig kroppsform. Alla implantat är ytruggade upp till kragen med undantag för MSc-versionens implantat som har en 3 mm MSc-yta koronalt. Den uppruggade ytan har ett Sa-värde på 1,4 mikron. Externa sexkant implantatet finns också i den vinklade plattformen Co-Axis®-design. Med en inbyggd plattformsvinkling på 12°, 24° och 36°, möjliggör denna design lutning av implantatet utan att kompromissa med den restaurerande uppkomstvinkeln.

Avsedd användning

Detta system är avsett att hjälpa till vid behandlingen av delvis eller helt tandlösa patienter som är kvalificerade för placering av ett eller flera tandimplantat som ett sätt att fixera en permanent eller avtagbar enkelkrona, partiell eller hel båge tandprotes i över- eller underkäken.

Dessa anordningar är avsedda att placeras på ett förborrat ställe i det alveolära benet där de osseointegreras (bildar en stel förbindelse med ben), och en distans är fäst för kvarhållande av en protes.

Enheterna möjliggör omedelbar eller fördröjd protesrestaurering baserat på användarens utvärdering av patientens lämplighet.

Systembeståndsdelarna är klassificerade som medicintekniska produkter och är avsedda för engångsbruk på en enda patient.

Indikationer för användning

Southern Implants externa sexkant implantat är avsedda för kirurgisk placering i över- eller underkäken för att tillhandahålla ett sätt för protetisk fastsättning av kronor, broar eller överproteser med fördröjd eller omedelbar belastning. Southern Implants externa sexkant implantat är avsedda för omedelbar funktion när god primär stabilitet med lämplig ocklusal belastning uppnås.

Avsedda användaren

Maxillofacial kirurger, allmänna tandläkare, ortodontister, parodontister, protetiker och andra ändamålet utbildade och erfarna implantatanvändare.

Avsedda miljö

Produkterna är avsedda att användas i en klinisk miljö som en operationssalar eller ett tandläkarkonsultation rum.

Avsedda patientpopulation

Denna enhet används vid tänder lagning av delvis eller helt tandlösa patienter i över- eller underkäken. Restaureringar kan bestå av enkla tänder, partiella eller hela broar och kan vara fixerade eller borttagbara.

Information om kompatibilitet

Southern Implants implantat bör återställas med Southern Implants komponenter. Använd komponenter som motsvarar anslutningstypen och protesplattformen när du återställer de externa sexkant implantaten. För ytterligare information se produktkatalogerna (CAT-2020 & CAT-2095).

Tabell A – Externt sexkant implantatområde

Produktkod	MSc	Konisk/cylindrisk	Implantatet diameter (mm)	Implantatlängder (mm)
Regelbundna implantat				
Rakt				
IP	✓	Konisk	Ø3,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBN		Cylindrisk	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBNT	✓	Konisk	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBS	✓	Cylindrisk	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
I4B		Cylindrisk	Ø4,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15

IBT	✓	Konisk	Ø4,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBPS		Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BA	✓	Cylindrisk	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAT	✓	Konisk	Ø5,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT		Konisk	Ø6,0	6/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
Co-Axis®				
IBNT12D	✓	Konisk	Ø3,25	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBT12D	✓	Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR12D	✓	Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
IBR24D	✓	Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
IBR36D	✓	Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BAT12D	✓	Konisk	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR12D	✓	Konisk	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR24D	✓	Konisk	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAR36D	✓	Konisk	Ø5,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20/ 22/ 24
BBBT12D		Konisk	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBT24D		Konisk	Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
INVERTA® Implantat				
Rakt				
IV-EX30-37		Konisk	Ø3,0– Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX35-45		Konisk	Ø3,5– Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX40-50		Konisk	Ø4,0– Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IV-EX52-60		Konisk	Ø5,2– Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX30-37	✓	Konisk	Ø3,0– Ø3,7	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX35-45	✓	Konisk	Ø3,5– Ø4,5	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX40-50	✓	Konisk	Ø4,0– Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15
IVM-EX52-60	✓	Konisk	Ø5,2– Ø6,0	10/ 11,5/ 13/ 15
Co-Axis®				
IV-EX3012D-37		Konisk	Ø3,0– Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IV-EX3512D-45		Konisk	Ø3,5– Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX4012D-50		Konisk	Ø4,0– Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IV-EX5212D-60		Konisk	Ø5,2– Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX3012D-37	✓	Konisk	Ø3,0– Ø3,7	11,5/ 13/ 15
IVM-EX3512D-45	✓	Konisk	Ø3,5– Ø4,5	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX4012D-50	✓	Konisk	Ø4,0– Ø5,0	11,5/ 13/ 15/ 18
IVM-EX5212D-60	✓	Konisk	Ø5,2– Ø6,0	11,5/ 13/ 15/ 18
Interna drivenhet externa sexkant implantat				
INPI		Cylindrisk	Ø3,3	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
IBI		Cylindrisk	Ø3,75	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18/ 20
IBTI		Konisk	Ø4,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BAI		Cylindrisk	Ø5,0	6/ 7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BATI		Konisk	Ø5,0	10/ 11,5/ 13/ 15/ 18
BBBI		Cylindrisk	Ø6,0	7/ 8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15
BBBTI		Konisk	Ø6,0	8,5/ 10/ 11,5/ 13/ 15/ 18

OBS: Alla produkter är inte godkända för försäljning i alla länder.

Kliniska fördelar

De kliniska fördelarna med tandimplantatbehandling inkluderar förbättrad tuggfunktion, tal, estetik och patientens psykologiska välbefinnande. Genom denna procedur kan patienter förvänta sig att få sina saknade tänder utbyta och/eller återställda kronor.

Förvaring, rengöring och sterilisering

Komponenten levereras steril (steriliserad med gammastrålning) och avsedd för engångsbruk före utgångsdatum (se förpackningsetikett). Steriliteten garanteras om inte behållaren eller förseglingen är skadad eller öppnad. Om förpackningen är skadad, använd inte produkten utan kontakta din Southern-representant eller returnera till Southern Implants®. Enheterna måste förvaras på en torr plats i rumstemperatur och inte utsättas för direkt solljus. Felaktig förvaring kan påverka enhetens egenskaper. Återanvänd inte komponenter som endast är avsedda för engångsbruk. Återanvändning av dessa komponenter kan resultera i:

- skador på ytan eller kritiska dimensioner, vilket kan leda till försämring av prestanda och kompatibilitet.
- ökar risken för infektion och kontaminering mellan patienter om engångsartiklar återanvänds.

Southern Implants® tar inget ansvar för komplikationer i samband med återanvända engångskomponenter.

Kontraindikationer

Kontraindikationer för implantatbehandling inkluderar:

- patienter som är medicinskt olämpliga för orala kirurgiska ingrepp.
- där ett otillräckligt antal implantat kan placeras vilket begränsar protesens funktionella stöd.
- patienter under 18 år.
- patienter med dålig benkvalitet.
- patienter med blodsjukdomar.
- förekomst av infektion på implantatstället.
- patienter med vaskulär hörselskador.
- patienter med okontrollerad diabetes.
- patienter med drog- eller alkoholmissbruk.
- patienter som genomgår kronisk högdos steroidbehandling.
- patienter som genomgår antikoagulantibehandling.
- patienter med metabolisk skelettsjukdom.
- patienter som genomgår strålbehandling.
- patienter med ren titan, titanlegering (Ti6Al4V), guld, palladium, polyeter eter keton (PEEK), eller iridium allergier eller överkänslighet.

Varningar och försiktighet

DESSA INSTRUKTIONER ÄR INTE AVSEDD SOM ETT ERSÄTTNING FÖR ADEKVAT UTBILDNING.

- För säker och effektiv användning av tandimplantat rekommenderas det starkt att specialiserad utbildning genomförs, inklusive praktisk träning för att lära sig rätt teknik, biomekaniska krav och röntgenutvärderingar.
- Produkter måste säkras mot aspiration när de hanteras intraoralt. Aspiration av produkter kan leda till infektion eller oplanerad fysisk skada.

Ansvar för korrekt patientval, adekvat utbildning, erfarenhet av placering av implantat och tillhandahållande av lämplig information för informerat samtycke vilar på läkaren. Felaktig teknik kan resultera i implantatfel, skada på nerver/kärl och/eller förlust av stödjande ben. Implantatfel ökar när implantat placeras i bestrålat ben eftersom strålbehandling kan resultera i progressiv fibros av kärl och mjukvävnad, vilket leder till minskad läkningsförmåga.

Det är viktigt att vara medveten om och undvika skador på vitala strukturer som nerver, vener och artärer. Skador på vitala anatomiska strukturer kan orsaka allvarliga komplikationer som skador på ögat, nervskador och överdriven blödning. Det är viktigt att skydda den infraorbitala nerven. Att inte identifiera faktiska mätningar i förhållande till röntgendata kan leda till komplikationer.

Nya och erfarna implantatanvändare bör träna innan de använder ett nytt system eller försöker göra en ny behandlingsmetod. Var särskilt försiktig när du behandlar patienter som har lokala eller systemiska faktorer som kan påverka läkningen av benet och mjukvävnaden (d.v.s. dålig munhygien, okontrollerad diabetes, är på steroidbehandling, rökare, infektion i det närliggande benet och patienter som hade orofacial strålbehandling).

Noggrann granskning av potentiella kandidater för implantat måste utföras inklusive:

- en omfattande medicinsk och tandhistorik.
- visuell och radiologisk inspektion för att bestämma adekvata bendimensioner, anatomiska landmärken, ocklusala tillstånd och periodontal hälsa.
- tandgnissling och ogynnsamma käke förhållanden måste beaktas.
- korrekt preoperativ planering med ett bra team mellan välutbildade kirurger, reparativa tandläkare och labbtekniker är avgörande för framgångsrik implantatbehandling.
- minimering av traumat mot värdvävnaden ökar potentialen för framgångsrik osseointegrering.
- elektrokirurgi bör inte göras runt metallimplantat eftersom de är ledande.

Om produkten inte fungerar som planerat måste det rapporteras till tillverkaren av enheten. Kontaktinformationen för tillverkaren av denna enhet för att rapportera en förändring i prestanda är: sicomplaints@southernimplants.com.

Biverkningar

Biverkningarna av användningen av systemet är inte olika de av tandimplantatbehandling. Möjliga biverkningar av implantatbehandling inkluderar:

- smärta
- svullnad
- fonetiska svårigheter
- gingivalbetennelse

Mindre vanliga men mer ihållande symtom inkluderar, men är inte begränsade till:

- allergiska reaktioner på implantat och/eller distansmaterial
- brott på implantatet och/eller distansen
- lossning av distansskruven och/eller hållarskruven
- infektion som kräver revidering av tandimplantatet
- nervskada som resulterar i permanent svaghet, domningar eller smärta
- histologiska svar med möjlig makrofag- och/eller fibroblast-inblandning
- bildning av fettembolism
- lossning av implantatet som kräver revisionskirurgi
- perforering av sinus maxillär
- perforering av labial och linguala plattor
- benförlust som eventuellt kan leda till revision eller avlägsnande av implantatet.

Försiktighetsåtgärd: bibehåll sterilitetsprotokoll

Implantat är förpackade enligt följande:

1. En ytterförpackning bestående av en styv, genomskinlig låda som fungerar som skydd för innerförpackningen.
2. Innerförpackningen består av en blisterförpackning (genomskinlig plastformad blisterbas med TYVEK avtagbara lock).
3. Inuti den inre förpackningen finns det ett ihålligt rör som innehåller ett implantat upphängt i en titanring, vilket säkerställer att implantatet aldrig vidrör plaströrets insida.
4. Märkningsinformation finns på ytan av det avtagbara locket och på utsidan av den styva lådan.

Omsorg måste iaktas för att bibehålla implantatets sterilitet genom korrekt öppning av förpackningen och hantering av implantatet.

1. Öppna implantatförpackningen i det icke-sterila fältet, med icke-sterila handskar, riv adressetiketten för att öppna lådan.
2. Ta bort den inre blisterförpackningen med icke-sterila handskar. Placera inte plastlådan eller blisterförpackningens lock på det sterila fältet. Innehållet i denna innerförpackning är sterilt.
3. Den förseglade blistern ska öppnas av en assistent (med icke-sterila handskar): ta bort TYVEK-locket och släpp eller placera det sterila röret på det sterila fältet, öppna rörlocket och fäst implantatplaceringsverktyget på implantatet och ta försiktigt bort det från sterilt rör. Rör inte det sterila implantatet.

Andra sterila komponenter är förpackade i en avdragspåse eller blisterbas med ett avtagbara lock. Märkningsinformation finns på den nedre halvan av påsen, inuti förpackningen eller på ytan av det avtagbara locket. Sterilitet garanteras om inte påsen är skadad eller öppnad. Icke-sterila komponenter levereras rena men inte sterila i en plasthöljet eller blisterbas med avtagbara lock. Märkningsinformation finns på den nedre halvan av påsen eller på ytan av det avtagbara locket.

Besked om allvarliga tillbud

Varje allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren av produkten och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Kontaktinformationen för tillverkaren av denna enhet för att rapportera en allvarlig incident är följande: sicomplaints@southernimplants.com.

Materialer

Materialtyp Kommersiellt rent titan (klass 4, ASTM F67 och ISO5832-2, UTS $\geq$ 900 MPa)

Avfallshantering

Avfallshantering av apparaten och dess förpackning: följ lokala föreskrifter och miljökrav, med hänsyn till olika föroreningsnivåer. Vid kassering av förbrukade föremål, ta hand om vassa borrar och instrument. Tillräcklig Personlig skyddsutrustning (PPE) måste alltid användas.

MR-säkerhet

Icke-kliniska tester har visat att Southern Implants® tandimplantat, metalliska distanser och protesskruvar är MR-villkorade.

En patient med dessa enheter kan säkert skannas i ett MR-system som uppfyller följande villkor:

- statiskt magnetfält på endast 1,5 Tesla och 3,0 Tesla.
- maximalt spatialgradientmagnetfält på 3000 Gauss/cm (30 T/m).
- maximalt MR-system rapporterat SAR motsvarande Normalt driftläge för alla landmärken (Head SAR på 3,2 W/kg för huvudlandmärke, 2 W/kg helkropp och lämplig delkropps-SAR för andra landmärken). För avbildning av landmärken ovanför bröstkorgen kommer en kontinuerlig skanningstid på 15 minuter att kräva en kylningsfördröjning på minst 5 minuter.
- i de icke-kliniska testerna sträcker sig bildartefakten som orsakas av enheten cirka 20 mm från Southern Implants tandimplantat, distanser och protetik skruvar, när den avbildas med en gradientekopulssekvens och ett 3,0 Tesla MRI-system.

Löstagbara restaureringar bör tas ut före scanning, vilket görs för klockor, smycken etc.

Om det inte finns någon MR-symbol på produktetiketten, observera att denna enhet inte har utvärderats för säkerhet och kompatibilitet i MR-miljön.

Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP)

I enlighet med den europeisk förordning om medicintekniska produkter (MDR; EU2017/745), finns en sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) tillgänglig för granskning med avseende på Southern Implants® produktsortiment.

Relevant SSCP kan ses på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

OBS: ovanstående webbplats kommer att vara tillgänglig vid lanseringen av den europeiska databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED).

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt ingår i produktsortimentet Southern Implants® och bör endast användas med tillhörande originalprodukter och enligt rekommendationerna i de individuella produktkatalogerna. Användaren av denna produkt måste studera utvecklingen av Southern Implants® produktsortiment och ta fullt ansvar för korrekta indikationer och användning av denna produkt. Southern Implants® tar inget ansvar för skador på grund av felaktig användning. Observera att vissa Southern Implants®-produkter kanske inte säljs eller släpps ut för försäljning på alla marknader.

Grundläggande UDI

Produkt	Grundläggande UDI-nummer
Grundläggande UDI för allmänna tandimplantat	6009544038699H

Relaterad litteratur och kataloger

CAT-2020 - Externa Sexkant Implantat Produktkatalog

CAT-2095 - Externa Sexkant INVERTA® Implantat Produktkatalog

Symboler och varningar

											
Tillverkare: Southern Implants® 1 Albert Rd, P.O Box 605 IRENE, 0062, South Africa. Tel: +27 12 667 1046	CE- märkning 2797	Receptbelagd enhet*	Steriliserad med bestrålning	Ikke steril	Sista förbrukningsdag (mm-åå)	Återanvänd inte	Omsterilisera inte	Katalognummer	Batchkod	Medicinteknisk produkt	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
											
Auktoriserad representant för Schweiz	Tillverkningsdatum	Magnetisk resonans villkorad	Magnetisk resonanssäker	Enkelt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning inuti	Enkelt sterilt barriärsystem	Se bruksanvisningen	Försiktighet	Skyddas från solljus	Använd inte om förpackningen är skadad		

* Receptenhet: Endast Rx. Försiktighet: Federal lag begränsar denna enhet till försäljning av eller på order av en legitimerad läkare eller tandläkare.

Kanadas undantag från tillståndsplikt: Vänligen notera att inte alla produkter kan ha licensierats i enlighet med kanadensisk lag.

Alla rättigheter reserverade. Southern Implants®, the Southern Implants® -logotypen och alla andra varumärken som används i detta dokument är, om inget annat anges eller framgår av sammanhanget i ett visst fall, varumärken som tillhör Southern Implants®. Produktbilder i detta dokument är endast avsedda för illustration och representerar inte nödvändigtvis produkten korrekt i skalen. Det är läkarens ansvar att inspektera symbolerna som finns på förpackningen till produkten som används.